

Minstrel



Minstrel est le lève-personne à harnais à boucles traditionnel dédié aux routines de transfert quotidiennes des résidents non autonomes.

GALERIE DES RÉSIDENTS ARJO



D



E

© Arjo 2019

D. Incapable de supporter son poids avec ses pieds. Peut s'asseoir si elle est bien soutenue.

E. Éprouve des difficultés à rester assise et risque, donc, de rester allongée ou partiellement allongée au lit, ne peut s'asseoir que sur un siège apportant un soutien spécifique.

Pour plus d'informations, contactez Arjo.

- **Simplicité**
Facile à comprendre et simple à utiliser.
- **Contact avec les yeux**
La télécommande permet au personnel soignant de se déplacer, de rester près du résident et de maintenir un bon contact visuel tout au long du processus de levage et de transfert.
- **Harnais à boucles**
Les solutions de harnais à boucles sont disponibles dans une grande variété de modèles et de tailles.
- **Soulever un patient du sol**
Avec Minstrel, un seul soignant peut déplacer un résident tombé au sol.
- **Système de pesée électronique (en option)**
Minstrel est disponible avec un système de pesée en option qui permet au personnel soignant de peser le résident tout en effectuant un transfert.

Principales caractéristiques

CINTRE SOLIDE ET STABLE

Cintre solide conçu pour minimiser le balancement du résident pendant le levage et le transfert.

ROUES À FAIBLE FRICTION

Roues conçues pour un déplacement facilité et permettre au personnel soignant de manœuvrer pendant le transfert.



SYSTÈME DE PESÉE (EN OPTION)

Un système de pesée suspendu en option permet de peser de manière efficace des résidents dépendants.

DOUBLE COMMANDE

Minstrel peut être commandé à partir du panneau de commande sur le mât ou à l'aide de la télécommande, ce qui permet au personnel soignant de rester près du résident tout en actionnant le lève-personne.

AJUSTEMENT DU CHÂSSIS

Le châssis peut être ajusté pour permettre l'accès et la maniabilité autour de grands fauteuils, de fauteuils roulants, de lits et de toilettes.


INFORMATIONS PRODUIT

Capacité maximale admissible	190 kg
Poids du lève-personne (avec berceau et batterie)	56 kg
Hauteur de levage max.	2000 mm
Hauteur de levage min.	625 mm
Amplitude de levage	1375 mm
Hauteur de rangement totale min.	1330 mm
Largeur externe, avec pieds rapprochés	645 mm
Largeur externe, pieds écartés	1181 mm
Largeur interne, jambes fermées	545 mm
Largeur interne, pieds écartés	1080 mm
Espace pour les pieds (du sol au haut des pieds)	110 mm
Espace sous le châssis (entre le sol et le bas du châssis)	45 mm
Longueur du lève-personne	1275 mm
Diamètre de rotation	1420 mm
Catégorie de protection du lève-personne	IPX4
Catégorie de protection de la télécommande	IPX7
Batterie	24 V, 4 Ah
Voyant de charge de la batterie	
Indicateur d'heures de fonctionnement - affiche la durée totale d'utilisation (en heures)	
Arrêt d'urgence et bouton de descente d'urgence	
Coupure automatique du courant électrique en cas de descente sur un obstacle	
Roues à faible friction avec freins sur les deux roues arrière	

ACCESSOIRES

Large choix de harnais à boucles et de Flites spéciaux (à usage unique)
Option : Système de pesée suspendu
Désinfectants Arjo

ESPACE REQUIS

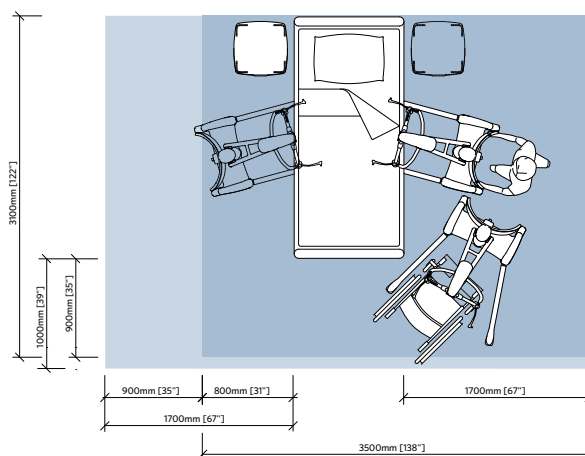

- La zone bleue indique la superficie de travail minimale requise pour que le personnel soignant puisse utiliser le lève-personne au sol de manière ergonomique à partir d'un seul côté.
- La zone bleu clair indique l'extension nécessaire de la zone de travail pour faciliter les activités des deux côtés afin d'offrir un accès adéquat au résident, au lève-personne au sol et au personnel soignant.