

Minstrel



De Minstrel is een tillift voor tilbanden met lusbevestiging voor dagelijkse transfers van afhankelijke cliënten.

MOBILITEITSWIJZER VAN ARJO



D



E

© Arjo 2019

D. Niet in staat het eigen gewicht op de voeten te dragen.
Kan zitten met goede ondersteuning.

E. Heeft het moeilijk om te blijven zitten en blijft dus soms in bed liggen (volledig of half liggend), en kan soms alleen zitten in een speciale ondersteunende stoel

Neem contact op met Arjo voor meer informatie.

- **Eenvoud**
Eenvoudig te begrijpen en te bedienen.
- **Oogcontact**
De afstandsbediening biedt de zorgverlener de mogelijkheid om te bewegen en dicht bij de zorgvrager te blijven, zodat oogcontact mogelijk is tijdens het gehele til- en transferproces.
- **Tilbanden met bevestigingspunten**
Tilbanden met lusbevestiging zijn verkrijgbaar in allerlei soorten en maten.
- **Heffen vanaf de grond**
Met de Minstrel kan één zorgverlener, een zorgvrager die is gevallen, vanaf de vloer tillen.
- **Elektronische weegunit (optie)**
De Minstrel is verkrijgbaar met een optionele weegunit, zodat de zorgverlener de zorgvrager tijdens transfers kan wegen.

Belangrijkste kenmerken

STEVIIG TILJUK

Het stevige tiljuk in ontworpen om slingeren van de zorgvrager tijdens de til- en transfer-procedure te minimaliseren.

ZWENKWIELEN MET LAGE WRIJVING

De zwenkwieien rollen gemakkelijk en stellen de zorgverlener in staat om tijdens de transfer te manoeuvreren.



WEEGUNIT (OPTIONEEL)

Optionele hangende weegunit ondersteunt een efficiënte weegroutine voor afhankelijke zorgvragers.

DUBBELE BEDIENING

De Minstrel is te bedienen via het bedieningspaneel op de mast of met de afstandsbediening, zodat de zorgverlener tijdens het bedienen van tillift dicht bij de zorgvrager kan blijven.

VERSTELBAAR ONDERSTEL

Het onderstel kan worden versteld voor een betere toegankelijkheid en wendbaarheid rond grote stoelen, rolstoelen, bedden en toiletten.

PRODUCTINFORMATIE

Max. veilige tilbelasting	190 kg
Gewicht tillift (met tiljuk en batterij)	56 kg
Maximale tilhoogte	2000 mm
Minimale tilhoogte	625 mm
Bereik bij tillen	1375 mm
Min. hoogte bij opslag	1330 mm
Breedte onderstel bij gesloten poten	645 mm
Breedte onderstel bij open poten	1181 mm
Breedte poten gesloten	545 mm
Breedte poten open	1080 mm
Vrije beenruimte (vloer tot bovenkant benen)	110 mm
Vrije ruimte onder het onderstel (van vloer tot onderkant onderstel)	45 mm
Lengte tillift	1275 mm
Draaicirkel	1420 mm
Beschermingsklasse tillift	IPX4
Beschermingsklasse afstandsbediening	IPX7
Batterij	24 V, 4 Ah
Batterijlaadindicator	

Service-indicator - geeft de totale gebruikstijd (uren) aan

Noodstop en schakelaar voor omlaag brengen bij systeemuitval

Automatische uitschakeling indien de lift bij het omlaag brengen een obstakel raakt

Zwenkwieien met lage frictie, de achterste twee voorzien van rem


ACCESSOIRES

Groot assortiment speciale tilbanden met lusbevestiging en Flites (wegwerpbanden)

Optioneel: hangende weegunit

Arjo-desinfectiemiddelen

BENODIGDE RUIMTE

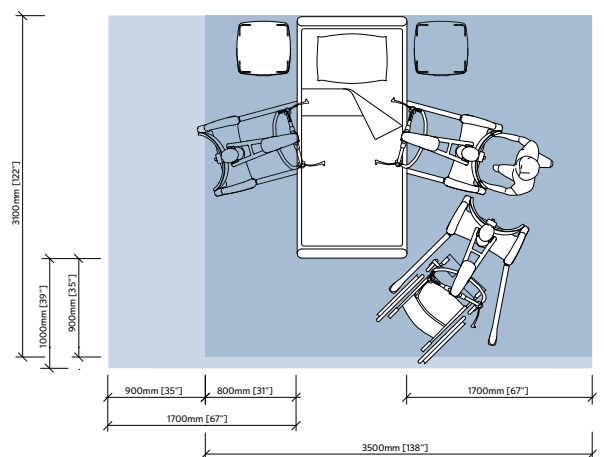

- Het blauwe gebied markeert de minimale werkruimte die de zorgverlener nodig heeft om op een ergonomisch verantwoorde manier vanaf één kant met de verrijdbare tillift te werken.
- Het lichtblauwe gebied markeert de benodigde extra werkruimte die de zorgverlener nodig heeft om aan beide zijden te kunnen werken met de verrijdbare tillift en de cliënt goed te kunnen bereiken.