

Minstrel



Minstrel è il classico sollevatore a corsetto ad asola per i trasferimenti quotidiani degli assistiti non autosufficienti.

GALLERIA DELLA MOBILITÀ ARJO



D



E

© Arjo 2019

D. Non è in grado di sostenere il proprio peso sugli arti inferiori. È in grado di stare seduta se ben sostenuta.

E. Ha difficoltà a stare seduta, pertanto rimane a letto in posizione sdraiata o semisdraiata, sedendosi solo su sedie speciali che offrono il massimo sostegno.

Per ulteriori informazioni non esitate a contattare Arjo.

- **Semplicità**
Intuitivo e di facile utilizzo.
- **Contatto visivo**
Grazie alla pulsantiera di controllo, l'assistente può spostarsi, rimanere vicino al residente/paziente e mantenere il contatto per l'intero processo di sollevamento e trasferimento.
- **Corsetti ad asola**
I corsetti ad asola sono disponibili in un'ampia gamma di modelli e misure.
- **Sollevare dal pavimento**
Con Minstrel, l'assistente può sollevare e trasferire da solo un residente/paziente che è caduto a terra.
- **Bilancia elettronica (opzionale)**
Minstrel è disponibile anche con una bilancia opzionale, che consente all'assistente di pesare rapidamente l'assistito durante i trasferimenti.

Caratteristiche principali



BARRA DI SOLLEVAMENTO ROBUSTA

Barra di sollevamento robusta studiata per ridurre al minimo le oscillazioni del residente/paziente durante il sollevamento e il trasferimento.

RUOTE A BASSO ATTRITO

Ruote progettate per ridurre al minimo l'attrito, aiutando l'assistente a manovrare il dispositivo durante il trasferimento.

BILANCIA (OPZIONALE)

La bilancia opzionale consente efficienti operazioni di pesatura dei residenti/pazienti non autosufficienti.

DOPPI COMANDI

Minstrel può essere azionato mediante il pannello di controllo sull'attuatore o con la pulsantiera di controllo, consentendo all'assistente di rimanere vicino al residente/paziente durante l'uso del sollevapazienti.

REGOLAZIONE DELLO CHASSIS

Lo chassis può essere regolato per permettere l'accesso e la manovrabilità anche in presenza di a sedie di grandi dimensioni, sedie a rotelle, letti e WC.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Carico di lavoro sicuro (SWL)	190 kg	419 lb
Peso sollevapazienti (con barra di sollevamento e batteria)	56 kg	123 lb
Altezza di sollevamento max	2.000 mm	78 ¾"
Altezza di sollevamento min	625 mm	24 ½"
Corsa	1.375 mm	54 ⅞"
Altezza min. totale per lo stoccaggio	1.330 mm	52 ¾"
Larghezza esterna con chassis chiuso	645 mm	25 ¾"
Larghezza esterna con chassis aperto	1.181 mm	46 ½"
Larghezza interna con chassis chiuso	545 mm	21 ½"
Larghezza interna con chassis aperto	1.080 mm	42 ½"
Altezza staffe chassis (dal pavimento al punto più alto delle staffe dello chassis)	110 mm	4 ⅓"
Spazio sotto le staffe dello chassis (dal pavimento alla base dello chassis)	45 mm	1 ¾"
Lunghezza sollevapazienti	1.275 mm	50 ¼"
Diametro di sterzata	1.420 mm	56"
Classe di protezione del sollevapazienti	IPX4	
Classe di protezione pulsantiera di controllo	IPX7	
Batteria	24V, 4 Ah	

Spia carica batteria

Il contaore visualizza il tempo totale di utilizzo (ore)

Arresto di emergenza e discesa di emergenza

Interruzione automatica della discesa in caso di ostacoli

Ruote a basso attrito, quelle posteriori con freni


ACCESSORI

Vasta gamma di corsetti ad asola per scopi specifici e Flites (corsetti monopaziente)

Opzione: bilancia sospesa

Disinfettanti Arjo

REQUISITI DI SPAZIO

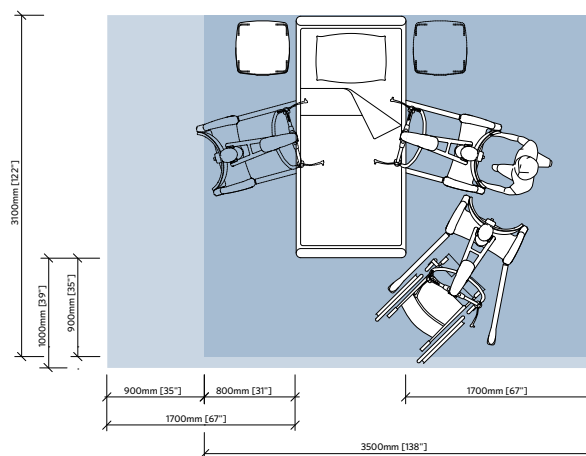

- L'area blu evidenzia lo spazio minimo necessario per un utilizzo ergonomico del sollevapazienti a pavimento da parte dell'assistente, operando da un lato.
- L'area azzurra evidenzia l'estensione di spazio necessaria per facilitare le attività da entrambi i lati, al fine di assicurare un accesso adeguato per il paziente, il sollevapazienti a pavimento e l'assistente.

Novembre 2019. Arjo raccomanda di utilizzare i suoi prodotti solo con componenti originali espressamente progettati per lo scopo e forniti da Arjo. Conformemente alla sua politica di costante miglioramento dei propri prodotti Arjo si riserva di modificarne le specifiche senza preavviso.

® e ™ sono marchi registrati delle aziende del Gruppo Arjo.
Arjo AB • Hans Michelsensgatan 10 • 211 20 Malmö • Sweden • +46 10 335 4500
Arjo S.p.A • Via Giacomo Peroni 400-402 • 00131 Roma • Italia • +39 0687426211

Arjo.A00153.1.0.IT.IT

arjo