


## CAMILLA GRÚA DE BAÑO MOTORIZADA DE ALTURA REGULABLE

# Miranti®



La camilla grúa Miranti, totalmente compatible con una gama de soluciones para baño recostado de Arjo, está diseñada para los pacientes y residentes con nivel de movilidad de Doris o Emma, que necesitan permanecer en posición recostada. Un único cuidador puede manejarla manteniendo posturas de trabajo ergonómicas en todo momento.

Diseñada para Doris y Emma

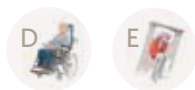

### **Permite a los residentes disfrutar de los beneficios del baño en posición recostada**

La camilla grúa Miranti, que soporta el cuerpo en toda su longitud, puede utilizarse para trasladar al residente directamente desde su cama o silla de ruedas a la bañera, para que los residentes que deben permanecer en posición recostada puedan disfrutar de los efectos beneficiosos del baño.

### **Diseñada para ser manejada por un solo cuidador**

La camilla grúa Miranti es ajustable en altura y cuenta con una quinta rueda de tracción eléctrica, frenado central y un respaldo motorizado que se puede subir o bajar según las preferencias del residente.

### **Diseñada para facilitar la limpieza y desinfección**

Todas las superficies externas de la camilla grúa Miranti están diseñadas para facilitar su limpieza, incluida la parte de la camilla, que presenta un revestimiento de espuma moldeada de poliuretano de alta densidad.

# Principales características

## ALTURA REGULABLE

Con un amplio margen de ajuste para alcanzar la altura preferida por el cuidador y el residente.

## ASIDEROS ERGONÓMICOS

Ubicados en ambos extremos de la camilla para maniobrar y controlar el sistema de tracción.

## ASA PLEGABLE CON PROTECCIÓN LATERAL

Proporciona seguridad y apoyo adicionales y se pliega para facilitar los traslados.

## RESPALDO MOTORIZADO

Se puede subir o bajar con solo pulsar un botón.

## CONTROLES DOBLES

Permiten al cuidador utilizar el dispositivo mientras permanece cerca del residente.

## COJINES DE APOYO AJUSTABLES PARA EL CUELLO Y LOS MUSLOS

## CAMILLA REVERSIBLE

Ambos extremos de la camilla se pueden utilizar como cabecero para permitir el acceso por cualquier lado de la cama o la bañera.

## BÁSCULA (OPCIONAL)

La báscula electrónica integrada de clase III ofrece una práctica alternativa para pesar a los residentes.


## QUINTA RUEDA MOTORIZADA (OPCIONAL)

Ayuda a reducir la carga de trabajo durante las transferencias y maniobras.

## FRENO CENTRAL



## REQUISITOS DE ESPACIO

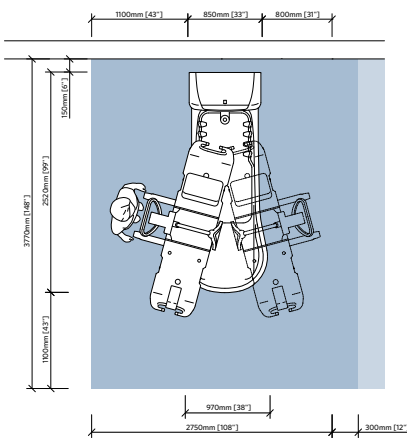

Zona de trabajo necesaria para facilitar las tareas de baño y traslado desde ambos lados de una bañera larga (posición recostada), así como para proporcionar un acceso adecuado para el residente, el equipo y el cuidador.

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Carga de trabajo segura	160 kg (353 lb)
Peso total (grúa, tracción eléctrica y báscula)	103 kg (227 lb)
Anchura total	930 mm (36 5/8 in)
Largo total	1970 mm (77 1/2 in)
Altura de la camilla, posición más baja	475 mm (18 3/4 in)
Altura de la camilla, posición más alta	1065 mm (41 7/8 in)
Rango del tramo de elevación (camilla)	590 mm
Altura de elevación, máx. (respaldo arriba)	1890 mm (74 3/8 in)
Altura de elevación, mín. (respaldo arriba)	1300 mm (51 1/8 in)
Anchura del chasis, máx.	950 mm (37 3/8 in)
Anchura del chasis entre las patas, mín.	382 mm (15 in)
Espacio libre debajo del chasis	30 mm (1 1/4 in)
Longitud máx. del chasis (frenos incl.)	905 mm (35 3/8 in)
Radio de giro (camilla en posición plana)	Ø 1990 mm (78 1/2 in)
Entrada de alimentación	24 V DC
Potencia máx.	150 VA
Clase de protección	IP X4
Clase de protección (mando de control)	IP X7

## CARACTERÍSTICAS Y ACCESORIOS ESTÁNDAR

- Altura regulable
- Respaldo de accionamiento eléctrico
- Frenos centrales
- Doble sistema de control en chasis y mando
- Subida y bajada de emergencia
- Asidero de seguridad plegable con protección lateral
- Asideros ergonómicos en el cabecero y el piecero
- Camilla reversible
- Correa de seguridad de fácil limpieza
- Cojines de apoyo ajustables para el cuello y los muslos
- Cargador de batería y dos baterías recargables

## CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

- Báscula integrada
- Quinta rueda de tracción eléctrica

## BAÑERAS COMPATIBLES

- Bañeras Rhapsody de longitud estándar (System 23) y larga (System 25)
- Bañera Primo de longitud estándar (System 23)

Classic Line

Para obtener información detallada, visite el sitio web [www.arjo.es](http://www.arjo.es)