

Miranti®



De Miranti is volledig compatibel met verschillende Arjo-ligbaden en is afgestemd op de behoeften van zorgvragers met het mobiliteitsniveau van Doris of Emma, die in een liggende positie moeten blijven. De Miranti kan worden bediend door één zorgverlener die tijdens de hele taak een ergonomisch verantwoorde werkhouding kan aannemen.

Geschikt voor Doris en Emma



Biedt afhankelijke zorgvragers de mogelijkheid om te profiteren van de voordelen die het baden biedt

De Miranti, uitgevoerd met een lange stretcher die het lichaam volledig ondersteunt, kan worden gebruikt om zorgvragers vanuit hun bed of rolstoel rechtstreeks over te brengen naar het bad. Zo kunnen ook zorgvragers die in een liggende positie moeten blijven, profiteren van de voordelen die het baden biedt.

Ontworpen voor bediening door één zorgverlener

De Miranti is in hoogte verstelbaar en voorzien van een gemotoriseerd vijfde wiel, een centraal remsysteem en een elektrisch verstelbare rugsteun die volgens de voorkeur van de zorgvrager omhoog of omlaag kan worden gebracht.

Ontworpen voor eenvoudige reiniging en desinfectie

Alle buitenoppervlakken van de Miranti kunnen worden gereinigd, met inbegrip van de stretcher die is gecoat met gegoten polyurethaanschuim met een hoge dichtheid.

Belangrijkste kenmerken

IN HOOGTE VERSTELBAAR

Met een groot tilbereik zodat voor zowel de zorgverlener als de zorgvrager de gewenste hoogte kan worden bereikt.

ERGONOMISCHE HANDGREPEN

Bevinden zich aan beide uiteinden van de stretcher voor het manoeuvreren en de bediening van de elektrische aandrijving.

WEGDRAAIBARE HANDGREEP EN ZIJRAIL

Biedt extra veiligheid en ondersteuning en is wegdraaibaar om transfers te vergemakkelijken.

ELEKTRISCH VERSTELBARE RUGLEUNING

Kan met een druk op de knop omhoog of omlaag worden gebracht.

DUBBELE BEDIENING

Naast de bediening op de Miranti is er een afstandsbediening, waardoor de zorgverlener dicht bij de zorgvrager kan blijven.

VERSTELBARE NEK- EN HEUPKUSSENS

OMKEERBARE STRETCHER

Beide uiteinden van de stretcher kunnen als hoofdeinde worden gebruikt, zodat het bed of bad vanaf beide kanten makkelijk toegankelijk is.

WEEGUNIT (OPTIONEEL)

De geïntegreerde elektronische weegunit (klasse III) biedt een handig alternatief om een zorgvrager te wegen.


GEMOTORISEERD VIJFDE WIEL (OPTIONEEL)

Helpt de werklast te verminderen bij het verplaatsen en manoeuvreren.

CENTRAAL REMSYSTEEM



BENODIGDE RUIMTE

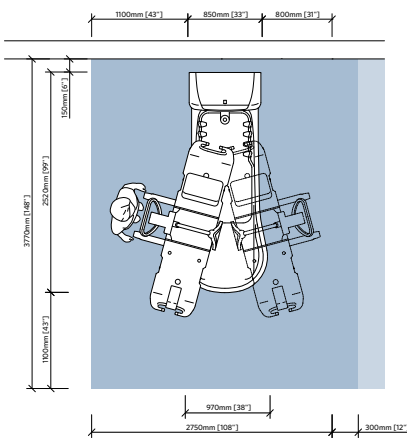

De vereiste werkruimte om aan beide zijden van een lang ligbad bad- en transferactiviteiten te kunnen verrichten en tegelijkertijd voldoende toegang te bieden voor de zorgvrager, de hulpmiddelen en de zorgverlener.

STANDAARDFUNCTIES EN -ACCESSOIRES

Elektrisch in hoogte verstelbaar

Elektrisch verstelbare rugleuning

Elektrisch centraal remsysteem

Dubbele bediening op onderstel en afstandsbediening

Omhoog- en omlaagbrengen in noodgevallen

Wegdraaibare veiligheidshandgreep en zijrail

Ergonomische handgrepen aan het hoofd- en voeteneinde

Omkeerbare stretcher

Reinigbare veiligheidsriemen (2)

Verstelbare nek- en heupkussens

Acculader en twee accu's

PRODUCTINFORMATIE

Veilige tilbelasting 160 kg

Totaal gewicht (lift, elektrische aandrijving en weegunit) 103 kg

Totale breedte 930 mm

Totale lengte 1970 mm

Hoogte stretcher, laagste stand 475 mm

Hoogte stretcher, hoogste stand 1065 mm

Tilbereik (stretcher) 590 mm

Hoogte stretcher, max. (rugsteun omhoog) 1890 mm

Hoogte stretcher, min. (rugsteun omhoog) 1300 mm

Breedte onderstel, max. 950 mm

Breedte onderstel tussen de poten, min. 382 mm

Vrije ruimte onder onderstel 30 mm

Lengte onderstel, max. (incl. remmen) 905 mm

Draaicirkel \varnothing 1990 mm

Voeding 24 V DC

Max. vermogen 150 VA

Beschermingsklasse IP X4

Beschermingsklasse (afstandsbediening) IP X7

OPTIONELE FUNCTIES

Geïntegreerde weegunit

Gemotoriseerd vijfde wiel

COMPATIBELE BADEN

Rhapsody met een standaard (System 23) en lange (System 25) badlengte

Primo met een standaard (System 23) badlengte

Classic Line

Zie www.arjo.nl voor meer gedetailleerde informatie