

MOTORDRIVEN LYFTVAGN FÖR BAD MED STÄLLBAR HÖJD

Miranti®



Miranti är helt kompatibel med ett sortiment av liggande badkar från Arjo och är utformad för att uppfylla behoven hos patienter med samma rörlighetsnivå som Doris eller Emma som måste badas i liggande ställning. Miranti är utformad för att en ensam vårdpersonal ska kunna hantera den och arbeta i ergonomiska positioner under alla moment.

Designad med Doris och Emma i åtanke



Underlättar åtkomst till ett välgörande bad för liggande patienter

Miranti har en fullängdsbår som stödjer hela kroppen och kan användas för att förflytta patienterna direkt från sängen eller rullstolen till badkaret, så att de enkelt kan njuta av ett välgörande bad.

Utformad för användning av en ensam vårdpersonal

Miranti har ställbar höjd, ett femte motordrivet hjul, centralbroms och motordrivet ryggstöd som kan höjas eller sänkas enligt patientens önskemål.

Utformad för enkel rengöring och desinficering

Alla de externa ytorna på Miranti är framtagna för att kunna torkas av, inklusive bårerna som är belagda med formgjutet polyuretanskum med hög täthet.

Viktiga funktioner

STÄLLBAR I HÖJD

Ställbar lyfthöjd som kan anpassas optimalt för både vårdpersonal och patient.

ERGONOMISKA HANDTAG

Placerade i båda ändarna av baren för manövrering och motordrivningskontroll.

FÄLLBART HANDTAG OCH SIDOSKYDD

Ger extra säkerhet och stöd, och kan fällas ned för att underlätta vid transport.

MOTORDRIVET RYGGSTÖD

Kan höjas eller sänkas med en knapptryckning.

DUBBLA MANÖVERREGLAGE

Gör det möjligt för vårdpersonal att styra stolen och samtidigt arbeta nära patienten.

JUSTERBARA STÖDKUDDAR FÖR NACKE OCH LÅR

VÄNDBAR BÅR

Båda ändarna på baren kan användas som huvudände, vilket underlättar åtkomsten till sängen eller badet eftersom båda sidorna av baren är lika lätta att nå.

VÅG (TILLVAL)

Inbyggd elektronisk klass III-våg för smidig vägning av patienter.


ETT FEMTE MOTORDRIVET HJUL (TILLVAL)

Underlättar arbetsbelastningen vid transport och manövrering.

CENTRALBROMS



UTRYMMESKRAV

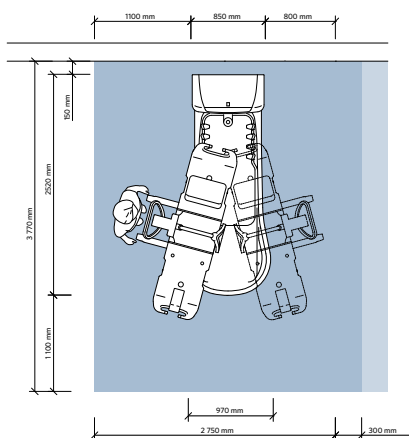

Arbetsyta som krävs för att underlätta badning och transport från båda sidorna av ett långt liggande badkar samtidigt som åtkomligheten underlättas för patienten, utrustningen och vårdpersonalen.

STANDARDKONSTRUKTIONER OCH -TILLBEHÖR

Ställbar i höjd

Eldrivet ryggstöd

Centralbromsar

Dubbla manöverreglage på chassit och handkontrollen

Nödliftning och nödsänkning

Fällbart säkerhetshandtag och sidoskydd

Ergonomiska handtag i huvud- och fotände

Vändbar bår

Avtorkningsbart säkerhetsbälte

Justerbara stödkuddar för nacke och lår

Batteriladdare och 2 st uppladdningsbara batterier

PRODUKTINFORMATION

Säker arbetslast	160 kg
Totalvikt (lyft, drivmotor och våg)	103 kg
Totalbredd	930 mm
Totallängd	1 970 mm
Bårens höjd, lägsta position	475 mm
Bårens höjd, högsta position	1 065 mm
Lyfthöjd (bår)	590 mm
Lyftens höjd, max (ryggstöd upp)	1 890 mm
Lyftens höjd, min (ryggstöd upp)	1 300 mm
Chassits bredd, max	950 mm
Chassits bredd mellan benen, min	382 mm
Fri höjd under chassit	30 mm
Chassits längd, max (inkl. bromsar)	905 mm
Vändradie (plan bårposition)	ø 1 990 mm
Matningsspänning	24 V DC
Maxeffekt	150 VA
Kapslingsklass	IP X4
Kapslingsklass (handkontroll)	IP X7

TILLVALSFUNKTIONER

Inbyggd våg

Femte motordrivet hjul

KOMPATIBLA BADKAR

Rhapsody standard (System 23) och långa (System 25) badkarlängder

Primo standardbadkarlängd (System 23)

Classic Line

Mer information hittar du på www.arjo.com