

TABLE À MANGER AU LIT MODERNE ET RÉSISTANTE

Table à manger au lit

**PROFONDEUR
DE LA TABLE :**
47 cm (18,5 pouces)

**LARGEUR HORS
TOUT DE LA TABLE :**
92 cm (36,2 pouces)

HAUTEUR VARIABLE :
73.5 - 110 cm
(28,7 - 43,3 pouces)




La table à manger au lit Arjo est adaptée pour une utilisation au lit, quelle que soit sa position, et au fauteuil, offrant aux patients une surface plate et stable leur permettant de manger, d'écrire, de lire... Grâce à sa construction à colonne unique et au réglage possible de sa hauteur, elle est compatible avec la plupart des lits et sièges.

- Le modèle OBTO est équipé d'un grand plateau fixe monobloc
- Les modèles OBT1 et OBT2 sont, quant à eux, munis d'un grand plateau inclinable et d'un petit plateau fixe
- Hauteur réglable par des vérins à gaz
- Plateau en deux parties inclinable*
- Réglette de lecture*
- Galerie filaire anti-chute disponible en option*

*Version inclinable uniquement

Couleurs et options

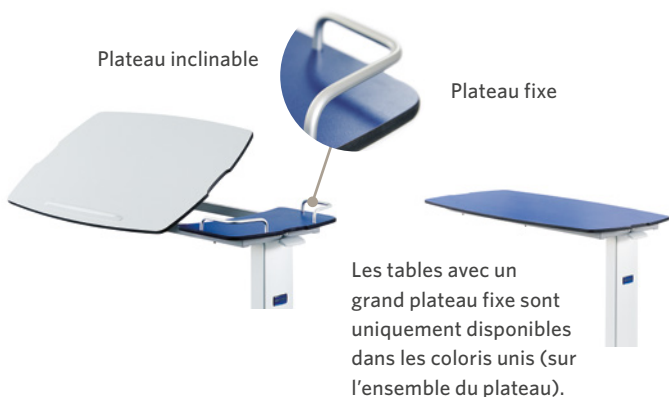

Deux modèles de table à manger au lit sont disponibles :



Les tables à manger au lit sont disponibles en 4 coloris unis et 3 teintes bois :



Caractéristiques et configurations

TABLES À MANGER POUR LIT/SIÈGE OBT0, OBT1 ET OBT2		CONFIGURATIONS DISPONIBLES
Dimensions du plateau	92 x 47 cm (18,5 x 36,2 pouces) max.	Coloris
Plage de réglage en hauteur	73,5 à 110 cm (28,7 à 43,3 pouces)	AB - Bleu AH
Angles d'inclinaison (approx.)	0°/18°/25°/32°/38°/43°	LL - Lilas
Poids du produit (approximatif)	17 kg (37,5 lb)	LG - Gris clair
Taille des roulettes	50 mm (5 cm / 2 pouces)	WO - Chêne blanc
Capacité maximale admissible	 25kg  55lb 25 kg (55 lb) Uniformément répartis	CB - Hêtre
Réaction au feu	Classification M1 selon la norme NF P 92-507:2004	NW - Noyer du Nord
Matériau		Options
Plan de travail	Stratifié haute pression compact (HPCL)	OBT0 - Grand plateau fixe non inclinable
Colonne	Aluminium extrudé avec finition anodisée	OBT1 - Plateau en deux parties (pas de rail)
Base	Finition acier Epoxy	OBT2 - Plateau en deux parties avec galerie filaire
Propriétés matérielles du HPCL	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Résistance aux égratignures et aux impacts liés à une utilisation quotidienne ▪ Résistance à l'humidité, à la vapeur et à la chaleur 	

Février 2019 Seules les pièces Arjo, spécialement conçues, doivent être utilisées sur les équipements et accessoires Arjo. Notre objectif est de poursuivre le développement de nos produits. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. ® et ™ sont des marques déposées du groupe de sociétés Arjo. Table à manger au lit est un dispositif médical de classe I, fabriqué par Arjo. Il est destiné aux soins d'hygiène assistés dans des environnements de soins. Lisez attentivement la notice d'utilisation. © Arjo, 2019

Chez Arjo, nous nous engageons à améliorer la vie quotidienne des personnes à mobilité réduite et atteintes de problèmes de santé liés à l'âge. Avec des produits et des solutions permettant une manutention ergonomique des patients, l'hygiène personnelle, la désinfection, le diagnostic et la prévention efficace des escarres et de la thrombo-embolie veineuse, nous aidons les professionnels de tous les environnements de soins à procurer un niveau de soins toujours plus sûrs et dignes. Tout ce que nous faisons, nous le faisons « with people in mind ».

Arjo AB · Hans Michsensgatan 10 · 211 20 Malmö · Sweden · +46 10 335 4500
 Arjo France SAS · 2, Avenue Alcide de Gasperi · CS 70133 · 59436 Roncq Cedex · France · +33 03 20 28 13 13
 Arjo Switzerland AG · Fabrikstrasse 8 · 4614 Hägendorf · Suisse · +41 (0) 61 337 97 77
 Arjo Belgium sa · Evenbroekveld 16 · 9420 Erpe-Mere · Belgique · +32 (0) 53 60 73 80

www.arjo.com