

IN HOOGTE VERSTELBAAR KANTELBAAR BAD

# Parker®



De Parker® is voorzien van een unieke scharnierende deur en is ontworpen om zowel onafhankelijke als geassisteerde transfers in en uit het bad mogelijk te maken. De Parker is in hoogte verstelbaar en gaat van zittend naar liggend, zodat de zorgverlener en de zorgvrager hun gewenste positie kunnen kiezen voor een betere badervaring.

Speciaal ontworpen met het oog op Albert, Barbara en Carl. Ook geschikt voor Doris-zorgvragers in combinatie met een passieve tillift.



### **Onafhankelijke en geassisteerde transfers**

De in hoogte verstelbare Parker kan in zittende of liggende positie worden geplaatst. De naar boven scharnierende deur is ontworpen om zorgvragers met mobiliteitsniveau A tot en met C gemakkelijk toegang te geven zonder de hulp van extra badliften. De Parker kan ook door zorgvragers met mobiliteitsniveau D met behulp van een passieve plafonlift worden gebruikt.

### **Meervoudige niveaus van beveiliging tegen verbranding**

Inclusief temperatuurweergave, mengkranen voor temperatuur en drukregeling, en automatische uitschakeling van de warmwatertoevoer bij overschrijding van veilige temperaturen.

### **Het badgenot verhogen**

De Parker biedt naast het eenvoudig baden nog andere opties, zoals Air Spa™ en Sound and Vision™, die voor grotere ontspanning zorgen en bijdragen aan het welzijn tijdens het baden.

# Belangrijkste kenmerken

## TOEGANG AAN DE ZIJKANT

Compatibel met een breed scala aan transferhulpmiddelen om onafhankelijke en geassisteerde transfers voor zorgverleners met beperkte mobiliteit te vergemakkelijken.

## IN HOOGTE VERSTELBAAR EN KANTELBAAR

De zorgverlener kan de gewenste werkhogte instellen zonder afbreuk te doen aan het comfort van de zorgvrager.

## MEERVOUDIGE FUNCTIES VOOR BEVEILIGING TEGEN VERBRANDING

## HANDDOUCHE MET VERGRENDELBARE BEDIENING

Hiermee kan de zorgverlener de douche aanzetten wanneer hij/zij zich dichtbij de zorgvrager bevindt.



## HOOFD- EN RUGKUSSENS

Voor extra comfort.

## GEÏNTEGREERD REINIGINGS- EN DESINFECTIESYSTEEM (OPTIONEEL)

## AIR SPA (OPTIONEEL)

Met negen jetstreams waarvan de snelheid kan worden aangepast.

## AUTOMATISCHE VULFUNCTIE

Vult het bad automatisch tot het vooraf ingestelde waterniveau.

## SOUND & VISION (OPTIONEEL)

Voor een verhoogde ervaring voor alle zintuigen.

### ALGEMEEN

Maximale veilige tilbelasting (zorgvrager + water)	300 kg
Maximumgewicht zorgvrager	210 kg
Totaal gewicht van de badkuip	126 kg
Totale lengte in de rechtopstaande stand	1855 mm
Totale lengte in de gekantelde stand	1960 mm
Totale breedte	750 mm
Hoogte deur met badkuip in hoogste stand, voeten in laagste stand	2510 mm
Zithoogte in de laagste stand	565 mm
Zithoogte in de hoogste stand	685 mm
Waterverbruik (volume voorgevuld voetenbad/automatisch vulniveau)	96 liter
Waterverbruik tot overlooppeil	230 liter
Vultijd bij 3 bar (43,5 PSI) dynamische druk (voorvullen)	1,7 min
Leegtijd vanaf het automatisch vulniveau	3 min
IP-klasse volgens IEC 60529	IP X4
IP-klasse afstandsbediening en Sound & Vision afstandsbediening	IP X7
Maximale statische waterdruk	6 bar
Minimale bedrijfsdruk (sommige varianten, afhankelijk van het land)	1 bar

### STANDAARD EIGENSCHAPPEN


- Weergave van de watertemperatuur
- Meervoudige functies voor heetwaterbescherming
- Handdouche met vergrendelbare bediening
- Automatische vulfunctie
- Overloop
- Vergrendelingsfunctie voor bedieningspaneel
- Kantelen en verlagen in noodgevallen
- Noodstop
- Hoofdsteunkussens

### OPTIONELE EIGENSCHAPPEN

- Geïntegreerd reinigungs- en desinfectiesysteem
- Air Spa-therapie
- Sound & Vision-therapie
- Kit voor warmwaterspoeling
- Voetsteun en rug/zitkussens
- Verkrijgbaar met een blauwe of grijze rand

### BENODIGDE RUIMTE

Het blauwe gebied geeft de werkruimte aan die nodig is om de transfer- en hygiëne-activiteiten voor zorgverleners met mobiliteitsniveau A tot en met C te vergemakkelijken, waarbij voldoende ruimte wordt gelaten voor de zorgvrager, apparatuur en verzorger. Zorgverleners met mobiliteitsniveau D die tijdens transfer gebruik maken van een passieve tillift hebben mogelijk meer ruimte nodig.

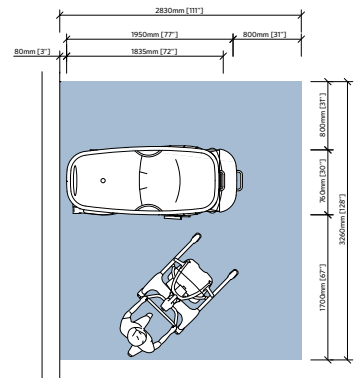

Zie [www.arjo.be](http://www.arjo.be) voor meer gedetailleerde informatie