

VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ ASISTOVANÉ KOUPÁNÍ V ZAKLONĚNÉ POLOZE

Parker®



Samostatný i asistovaný přesun

Výškově nastavitelnou vanu Parker je možné nastavit do sedící nebo zakloněné polohy. Dvířka, která se vyklápějí nahoru, usnadňují přístup klientům/pacientům s úrovní mobility A až C, aniž by bylo nutné použít koupelové zvedáky. V kombinaci s pasivním stropním zvedákem je vana Parker také vhodná pro klienty/pacienty s úrovní mobility D (viz interní kategorizace níže).

Vícestopňová ochrana proti opaření

Zahrnuje digitální displeje zobrazující teplotu, míchací ventily s regulací teploty a tlaku nebo automatické vypnutí teplé vody při překročení bezpečné teploty.

Zesílení prospěšných účinků koupele

Vana Parker nabízí ponornou koupel nebo režimy Air Spa™ a Sound and Vision™, které pomáhají zesilovat relaxační účinek a maximalizují prospěšný účinek koupele.

Navržena s ohledem na potřeby Alberta, Barbary, Carla a Doris.*



A Albert je schopen provádět denní aktivity samostatně bez pomoci jiné osoby. Může používat hůl/berli jako oporu.



B Barbara je schopná chůze, ale používá chodítko/berle jako oporu.



C Carl je schopen částečně zatížit alespoň jednu končetinu, ale jinak se pohybuje na invalidním vozíku.



D Doris není schopna unést nohama vlastní váhu. Může sedět, má-li dostatečnou oporu.

* Toto je interní kategorizace vytvořená společností Arjo na základě EU ISO standardů, která může pomoci při určení úrovně mobility člověka. Kategorizace neslouží v žádném případě ke stanovení diagnózy. V případě nejasností nás prosím kontaktujte. Použití konkrétních jmen je pouze ilustrační a neodkazuje na skutečné osoby ani jejich stav.

Řada Parker® se vyznačuje konstrukcí s výklopnými dvířky, která umožňuje samostatný i asistovaný přesun do vany a zpět. Vanu Parker s variabilní výškou lze nastavit do sedící nebo zakloněné polohy, aby si ošetřující personál i klient mohli sami zvolit nejlépe vyhovující polohu pro co nejpříjemnější zážitek z koupání.

Tato vana je určena pro asistované koupání a sprchování dospělých klientů v pečovatelských zařízeních (není určena k použití doma).

Vana Parker je určena pro používání náležitě školeným pečovatelským personálem, který je přiměřeně znalý pečovatelského prostředí, běžných postupů a procedur, a v souladu s pokyny v návodu k použití.

Jakékoli jiné použití je zakázáno. Vana by se měla používat pouze k uvedenému účelu.

Doporučujeme, aby pečovatelská zařízení zavedla do praxe pravidelné posuzování.

Ošetřovatelský personál by měl nejprve jednotlivé klienty posoudit podle následujících kritérií:

- Hmotnost klienta nesmí překročit 210 kg.
- Vanu mohou používat aktivní a poloaktivní klienti (tj. schopní sedět vzpřímeně na straně lůžka nebo na toaletě). V případě potřeby by měly být použity správné pomůcky pro přesun klientů.
- Klienti bez schopnosti samostatné opory (tj. schopnosti sedět vzpřímeně s oporou) mohou vanu používat pouze se stropním zvedákem a dvoubodovým závěsným ramenem s vakem s poutky pro přesun a koupání.
- Klient by měl být schopen porozumět pokynům a reagovat na ně nebo by měl mít jisté fyzické schopnosti pohybu, aby byla zajištěna bezpečná poloha během koupání.

Jestliže klient nespĺňuje tato kritéria, je nutné použít alternativní zařízení nebo systém.

Uvolnění od bolesti a svědění, jako pomůcka při léčení zánětlivé a traumatizované tkáně a též slouží, jako prostředí pro odstranění kontaminované tkáně.

📌 Toto je reklama na zdravotnický prostředek. Před použitím si prosím pečlivě přečtete návod k jeho použití, který obsahuje také informace k bezpečnému používání a další varování ve vztahu k prostředku.

Klíčové funkce

PŘÍSTUP Z BOKU

Možnost integrace s celou řadou pomůcek pro přesuny, které usnadňují samostatné a asistované přesuny osob s omezenou pohyblivostí.

MOŽNOST VÝŠKOVÉHO NASTAVENÍ A ZAKLONĚNÍ

Dovoluje ošetřujícímu personálu nastavit preferovanou pracovní výšku, aniž by tím utrpělo pohodlí klienta.

VÍCESTUPŇOVÁ OCHRANA PROTI OPAŘENÍ

RUKOJEŤ SPRCHY S UZAMYKATELNOU SPOUŠTÍ

Umožňuje ošetřujícímu personálu zapnout sprchu, když je blízko ke klientovi.



HLAVOVÝ A ZÁDOVÝ POLŠTÁŘ

Pro dodatečné pohodlí.

INTEGROVANÝ ČISTIČÍ A DEZINFEKČNÍ SYSTÉM (VOLITELNÝ)

AIR SPA (VOLITELNÝ)

S devíti tryskami s regulací průtoku.

AUTOMATICKÉ NAPOUŠTĚNÍ

Automaticky napustí vanu na přednastavenou úroveň.

VÍCESTUPŇOVÁ OCHRANA PROTI OPAŘENÍ

SOUND AND VISION (VOLITELNÝ)

Pro vylepšený mnohomsmyslový zážitek.

VAROVÁNÍ

Abyste zabránili nebezpečí výbuchu nebo požáru, nikdy nepoužívejte zařízení v prostředí s nadměrným obsahem kyslíku, v přítomnosti zdrojů tepla nebo hořlavých anestetických plynů.

VAROVÁNÍ

Vyvarujte se používání tohoto zařízení v blízkosti jiného zařízení nebo na jiném zařízení, protože by to mohlo způsobit nesprávný provoz. Pokud je takovéto použití nezbytné, toto zařízení i druhé zařízení je třeba pozorovat, aby byl zajištěn správný provoz.

VAROVÁNÍ

Aby nedošlo k úrazu el. proudem, musí být zařízení vždy připojeno k:

- trvalému napájení z uzemněné el. zásuvky;
- samostatné pojistce a proudového jističi;
- zařízení pro odpojení od sítě.

Všechny instalace musí být v souladu s místními zákony a předpisy.

VAROVÁNÍ

Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nikdy nepoužívejte v blízkosti zařízení jiné elektrické zařízení.

VAROVÁNÍ

Bezdrátová komunikační zařízení, jako jsou bezdrátová počítačová síťová zařízení, mobilní telefony, bezdrátové telefony nebo jiné základny, malé vysílačky atd., mohou toto zařízení ovlivnit a je třeba je udržovat ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od něj.

OBEČNÉ

Max. bezpečné pracovní zatížení (pacient + voda)	300 kg
Maximální hmotnost pacienta	210 kg
Celková hmotnost vany	126 kg
Celková délka ve vzpřímené pozici	1855 mm
Celková délka v zakloněné pozici	1960 mm
Celková šířka	750 mm
Výška dvířek v nejvyšší poloze vany, prostor pro nohy v nejnižší poloze	2510 mm
Výška sedáku v nejnižší pozici	565 mm
Výška sedáku v nejvyšší pozici	685 mm
Spotřeba vody (napuštěný prostor pro nohy/úroveň automatického napouštění)	96 litrů
Spotřeba vody do úrovně přepadu	230 litrů
Doba napuštění při dynamickém tlaku 3 bar (napuštění předem)	1,7 min
Doba vypuštění z úrovně automatického napouštění	3 min
Třída IP podle IEC 60529	IP X4
Třída IP ručního ovladače a ručního ovladače systému Sound & Vision	IP X7
Maximální statický tlak vody	6 bar (600 kPa)
Minimální provozní tlak (některé varianty v závislosti na zemi)	1 bar (100 kPa)

STANDARDNÍ VYBAVENÍ


- Zobrazení teploty vody
- Vícestupňová ochrana proti opaření
- Rukojeť sprchy s uzamykatelnou spouští
- Automatické napouštění
- Přepad
- Funkce zamknutí ovládacího panelu
- Nouzové naklonění a spouštění
- Nouzové zastavení
- Opěrka hlavy
- Opěrka nohou / nástavec pro zkrácení vany

VOLITELNÉ VYBAVENÍ

- Integrovaný čistící a dezinfekční systém
- Terapeutický režim Air Spa
- Terapeutický režim Sound & Vision
- Sada proudu teplé vody
- Opěrka nohou, zádový polštář a sedák
- Okraj vany v modré nebo šedé barvě

PROSTOROVÉ POŽADAVKY

- Modrá oblast označuje požadovaný pracovní prostor, který umožní provádět přesuny a hygienické úkony u klientů s úrovní mobility A až C a zároveň poskytne dostatečný přístup pro klienta, zařízení i ošetřující personál. Pro usnadnění přesunu klienta s úrovní mobility D pomocí pasivního zvedáku může být zapotřebí dodatečný prostor.

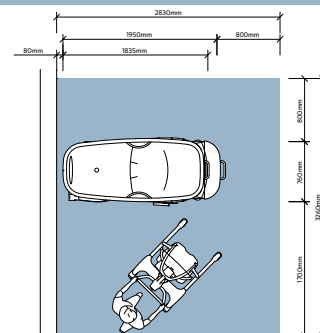

Další informace o našem příslušenství získáte od místního obchodního zástupce nebo na webu www.arjo.com/cs-cz.

Návod k použití na www.arjo.com/cs-cz a v menu stránek pokračujte: Výrobky > Hygiena > Koupací systémy > Parker > Stahování

© Arjo AB, Listopad 2021. U zařízení a výrobků dodaných společností Arjo používejte pouze Arjo součásti, tj. díly speciálně konstruované pro daný účel. Jelikož je naší zásadou trvalý rozvoj, vyhrazujeme si právo provádět změny designu, vlastností a specifikací inzerovaného typu zdravotnického prostředku bez předchozího upozornění. ® a ™ jsou ochranné známky náležející skupině společností Arjo.

Výrobce: ArjoHuntleigh AB · Hans Michsensgatan 10 · 211 20 Malmö · Švédsko · reg. č.: 556304-2026 · +46 10 335 4500
Lokální distributor: Arjo Czech Republic s.r.o. · Na Strži 1702/65 · 140 00 Praha 4 · Česká Republika · IČO: 469 62 549 · +420 225 092 388
Arjo.Parker.Flyer.1.1.CZ.CS.HCP

arjo