

HÖHENVERSTELLBARES SITZBADEWANNENSYSTEM FÜR DAS BEGLEITETE BADEN

Parker®



Die Parker® Sitzbadewanne verfügt über eine große Schwingtür und ermöglicht so unabhängige und begleitete Transfers in und aus der Wanne. Die Parker Sitzbadewanne ist höhenverstellbar und bietet Sitz- und Neigepositionen, damit die Pflegekraft und der Bewohner ihre bevorzugte Position wählen können, um das Baderlebnis zu verbessern.

Für Pflegebedürftige wie Albert, Barbara und Carl entwickelt.
Auch für Doris in Kombination mit einem passiven Lifter geeignet.



Unabhängige und begleitete Transfers

Die höhenverstellbare Parker Sitzbadewanne kann in eine Sitz- und Neigeposition eingestellt werden. Die Schwingtür erleichtert den einfachen Zugang für Patienten und Bewohner der Mobilitätsstufen A bis C, ohne dass zusätzliche Badelifter eingesetzt werden müssen. Die Parker Sitzbadewanne eignet sich, in Verbindung mit einem Deckenlifter, auch für Bewohner der Mobilitätsstufe D.

Mehrere Verbrühschutz-Stufen

Dazu gehören Temperaturanzeigen, temperatur- und druckregulierende Mischventile und eine automatische Heißwasser-Abschaltung, wenn bestimmte Temperaturwerte überschritten werden.

Noch wohltuendere Wirkung des Badens

Die Parker bietet eine Auswahl zwischen konventionellem Baden, Luftperlbad (Air Spa™) und Sound & Vision™ für mehr Entspannung und Förderung der beruhigenden Vorteile des Badens.

Ausstattungsmerkmale

SEITENEINSTIEG

Kann mit einer großen Auswahl an Transferhilfen verwendet werden, um unabhängige und begleitete Transfers für Personen mit eingeschränkter Mobilität zu ermöglichen.

HÖHENVERSTELLBAR MIT NEIGEVORRICHTUNG

Ermöglicht es der Pflegekraft, die gewünschte Arbeitshöhe zu erreichen, ohne den Komfort des Pflegebedürftigen zu beeinträchtigen.

MEHRFACHE VERBRÜHSCHUTZ-FUNKTIONEN

HANDBRAUSE MIT FESTSTELLKNOPF

Ermöglicht es der Pflegekraft, die Dusche zu aktivieren, wenn sie nahe am Bewohner steht.

KOPF- UND RÜCKENSTÜTZPOLSTER

Für noch mehr Behaglichkeit.

INTEGRIERTES REINIGUNGS- UND DESINFEKTIONS-SYSTEM (OPTIONAL)

LUFTPERLBAD (OPTIONAL)

Mit neun geschwindigkeits-regulierenden Düsen.

AUTOMATISCHE WANNENFÜLLUNG

Füllt das Bad automatisch auf den voreingestellten Wasserstand.

SOUND & VISION (OPTIONAL)

Für ein noch besseres multisensorisches Erlebnis.



ALLGEMEIN

Maximale sichere Arbeitslast (SAL) (Patient + Wasser)	300 kg
Max. Patientengewicht	210 kg
Gesamtgewicht der Wanne	126 kg
Gesamtlänge in der aufrechten Position	1855 mm
Gesamtlänge in der zurückgelehnten Position	1960 mm
Gesamtbreite	750 mm
Höhe der Tür, wenn die Badewanne in der höchsten Position und mit den Füßen in der niedrigsten Position ist	2510 mm
Sitzhöhe in der niedrigsten Position	565 mm
Sitzhöhe in der höchsten Position	685 mm
Wasserverbrauch (vorgefülltes Fußbecken/Automatischer Füllstand)	96 Liter
Wasserverbrauch bis Überlaufniveau	230 Liter
Füllzeit bei 3bar (43,5psi) dynamischem Druck (Vorfüllung)	100 Sekunden
Leerdauer vom Füllstand der automatischen Wannenföllung	3 Min.
IP-Klasse nach IEC 60529	IP X4
IP-Klasse der Handbedienung und der Sound & Vision-Handbedienung	IP X7
Höchster statischer Wasserdruck	6 bar (600 kPa, 87 psi)
Mindestbetriebsdruck (einige Varianten je nach Land)	1 bar (100 kPa, 14,5 psi)

STANDARD-AUSSTATTUNG


- Temperaturanzeige des Wassers
- Mehrere Verbrühschutz-Stufen
- Handbrause mit Feststellknopf
- Automatische Wannenföllung
- Überlauf
- Sperrfunktion für das Bedienfeld
- Notneigung und -absenkung
- Not-Aus-Schalter
- Kopfstützen-Polster

ZUSATZAUSSTATTUNG

- Integriertes Reinigungs- und Desinfektionssystem
- Luftperlbad-Therapie
- Sound & Vision-Therapie
- Heißwasserspöllung
- Fußstütze und Rückenstützpolster/Sitzkissen
- Wannerverkleidung in Blau oder Grau erhältlich

RAUMANFORDERUNGEN

Der blaue Bereich zeigt den benötigten Arbeitsbereich, um den Transfer und die Hygienetätigkeiten für Bewohner mit Mobilitätsstufe A bis C zu erleichtern, wenn an beiden Seiten ausreichend Platz für Bewohner/Patienten, Hilfsmittel und Pflegekraft zur Verfügung stehen soll. Es kann zusätzlicher Platz erforderlich sein, um den Transfer von Bewohnern mit Mobilitätsstufe D unter Verwendung eines passiven Lifters zu erleichtern.

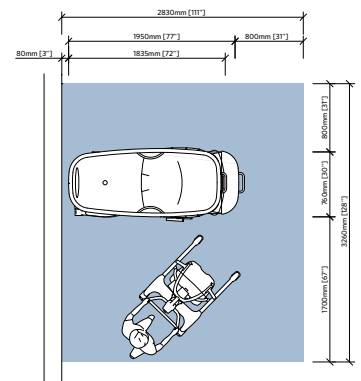

Für weitere Informationen besuchen Sie www.arjo.com

©Arjo, Oktober 2019. Alle Produkte tragen das CE-Zeichen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass im Zusammenhang mit den von Arjo gelieferten Geräten und zur Vorbeugung von Verletzungen, die durch die Verwendung von Fremdteilen auftreten könnten, nur Arjo Originalteile verwendet werden dürfen. Bei Nichtbeachtung dieses Hinweises übernehmen wir entsprechend unserer Verkaufsbedingungen keinerlei Haftung. Da wir unsere Erzeugnisse ständig weiterentwickeln, behalten wir uns das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor. Arjo.A00015.1.1.DE

Arjo AB • Hans Michelsengatan 10 • 211 20 Malmö • Schweden • +46 10 335 4500
 Arjo Deutschland GmbH • Peter-Sander-Straße 10 • 55252 Mainz-Kastel • Deutschland • +49 6134-186 0
 Arjo AG • Fabrikstrasse 8/Postfach • 4614 Hügendorf • Schweiz • +41 (0) 61 337 97 77
 Arjo Austria GmbH • Lemböckgasse 49A • 123 Wien • Österreich • +43 (0) 866 56

arjo