

AUSILIO AVANZATO PER IL SOLLEVAMENTO E LA POSIZIONE ERETTA

Sara® Plus



Sara Plus è un ausilio elettrico per la posizione eretta ed il sollevamento progettato per i trasferimenti attivi, gli esercizi di equilibrio, i primi passi e la deambulazione.

GALLERIA DELLA MOBILITÀ ARJO



C



D

© Arjo 2019

C. Non è in grado di sostenere il proprio peso sugli arti inferiori.
È in grado di stare seduta se ben sostenuta.

D. Ha difficoltà a stare seduta, pertanto rimane a letto in posizione sdraiata o semisdraiata, sedendosi solo su sedie speciali che offrono il massimo sostegno.
Per ulteriori informazioni contattare Arjo.

- **Miglioramento della funzionalità motoria**
Grazie alla pedana rimovibile, al sostegno offerto dal corsetto e al supporto degli arti superiori a forma arcuata con impugnature Arc-Rest, Sara Plus è studiato per facilitare gli esercizi per l'equilibrio, i primi passi e la deambulazione.
- **Sostegno per il busto**
Arc-Rest è parte integrante del meccanismo di sollevamento e fornisce un supporto aggiuntivo per il busto durante il sollevamento.
- **Singolo assistente**
Progettato per essere usato da un singolo assistente, Sara Plus è una soluzione per i sollevamenti e trasferimenti in posizione eretta, i primi passi e la deambulazione assistita.
- **Le soluzioni di corsetti**
Il corsetto è progettato appositamente per Sara Plus e fornisce un fissaggio sicuro al sollevapazienti, per reggere e sostenere il paziente/residente vicino ad Arc-Rest. Sono disponibili varie tipologie di corsetto: per la posizione eretta, per i trasferimenti e la deambulazione e lavabili con un panno.
- **Bilancia opzionale**
La bilancia opzionale facilita le operazioni di pesatura di routine.

Caratteristiche principali

ARC REST

Supporto degli arti superiori a forma arcuata dotato di impugnature per sostenere le braccia e il busto del paziente/residente, consentendogli di reggere il proprio peso usando anche la parte superiore del tronco, oltre che gli arti inferiori.

PROACTIVE PAD

Supporto per le ginocchia e gli arti inferiori per offrire sostegno e stabilità al paziente/residente, consentendogli al tempo stesso il naturale movimento in avanti delle ginocchia e la flessione delle caviglie mentre si alza e si siede.

PEDANA RIMOVIBILE

La pedana estraibile consente al paziente/residente di appoggiare i piedi direttamente sul pavimento durante gli esercizi per la deambulazione ed i primi passi.



DOPPI COMANDI

Doppi comandi su attuatore e pulsantiera di controllo. Quest'ultima consente all'assistente di muoversi e rimanere vicino al paziente/residente per mantenere un buon contatto visivo durante l'intera procedura.

BILANCIA (OPZIONALE)

La bilancia può essere utilizzata per pesare i pazienti/residenti o, se Sara Plus è usato senza pedana, per monitorare la loro capacità di reggere il proprio peso.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Carico di lavoro sicuro (SWL)	190 kg
Peso sollevapazienti (batteria inclusa)	78,7 kg
Altezza minima totale per lo stoccaggio	1195 mm
Altezza di sollevamento min	906 mm
Altezza di sollevamento max	1497 mm
Larghezza esterna con chassis chiuso	646 mm
Larghezza esterna con chassis aperto	1107 mm
Larghezza interna con chassis chiuso	534 mm
Larghezza interna con chassis aperto	1002 mm
Altezza max dello chassis (dal pavimento al punto più alto dello chassis)	116 mm
Altezza sotto lo chassis (dal pavimento alla base dello chassis)	30 mm
Lunghezza totale del sollevapazienti	1033 mm
Raggio di sterzata	1235 mm
Classe di protezione del sollevapazienti	IPX4
Classe di protezione pulsantiera di controllo	IPX7
Batteria	24 V, 6 Ah
Spia carica batteria	
Il contaore visualizza il tempo totale di utilizzo (ore)	
Arresto di emergenza e discesa di emergenza	
Interruzione automatica della discesa in caso di ostacoli	
Ruote a basso attrito, quelle posteriori con freni	

ACCESSORI

Ampia gamma di corsetti lavabili, lavabili con un panno e mono paziente (Flites)

Sedile da comoda

Appoggia piedi stretto

Estensione appoggia piedi

Ampio appoggia ginocchia


Rivestimento appoggia ginocchia

Cinghie per le braccia

Cinghie per le gambe

Accessori opzionali: Bilancia integrata

REQUISITI DI SPAZIO

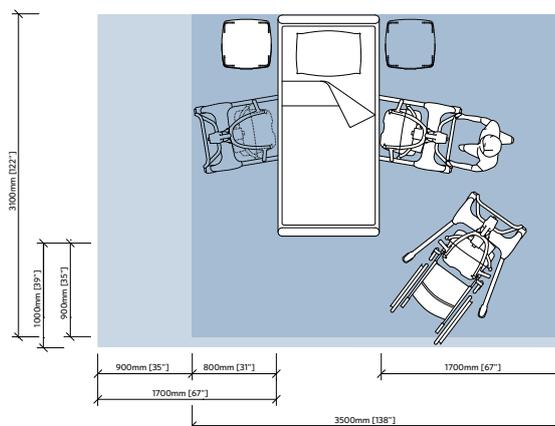

- L'area blu mostra lo spazio minimo necessario per consentire all'assistente di utilizzare gli ausili meccanici in modo ergonomico da un lato.
- L'area azzurra mostra l'estensione di spazio necessaria per facilitare le attività da entrambi i lati, al fine di assicurare un accesso adeguato al paziente, all'ausilio meccanico e all'assistente.

Novembre 2019. Arjo raccomanda di utilizzare suoi prodotti solo componenti originali espressamente progettati per lo scopo e forniti da Arjo. Conformemente alla sua politica di costante miglioramento dei propri prodotti Arjo si riserva di modificarne le specifiche senza preavviso.

® e ™ sono marchi registrati delle aziende del Gruppo Arjo.
Arjo AB • Hans Michelsensgatan 10 • 211 20 Malmö • Sweden • +46 10 335 4500
Arjo S.p.A • Via Giacomo Peroni 400-402 • 00131 Roma • Italia • +39 0687426211

Arjo.A00173.2.0.IT.IT

arjo