

GEAVANCEERDE, ACTIEVE TILLIFT

# Sara<sup>®</sup> Plus



De Sara Plus is een elektrische actieve tillift die is ontworpen voor actieve transfers, evenwichts-, stap- en looptraining.

## DE MOBILITEITSWIJZER VAN ARJO



C



D

© Arjo 2019

**C.** In staat om gedeeltelijk eigen gewicht te dragen op ten minste één been. Gebruikt een rolstoel om zich over een afstand te verplaatsen.

**D.** Niet in staat het eigen gewicht op de voeten te dragen. Kan zitten met goede ondersteuning.

Neem contact op met Arjo voor meer informatie.

- **Stimuleert mobiliteit door oefeningen**  
De Sara Plus heeft een afneembare voetenplaat en biedt steun met de armsteun en tilband. Daarnaast is de Sara Plus ontworpen om de zorgvrager te ondersteunen bij evenwichts-, stap- en looptraining.
- **Ondersteuning van het bovenlichaam**  
De armsteun is onderdeel van het tilmechanisme en geeft tijdens het tillen extra ondersteuning aan het bovenlichaam.
- **Één zorgverlener**  
De Sara Plus kan door één zorgverlener worden bediend, waardoor het een kostenbesparende oplossing voor staande transfers, stap- en looptraining is.
- **Tilbandoplossingen**  
De tilband is specifiek ontworpen voor de Sara Plus. Deze biedt een veilige bevestiging aan de tillift waarbij de zorgvrager wordt ondersteund en dicht bij de armsteun blijft. Er zijn verschillende tilbanden leverbaar: voor staande transfers, looptraining, disposables (Flites) en een afveegbare uitvoering.
- **Optionele weegunit**  
Met de optionele geïntegreerde weegunit verloopt het wegen eenvoudiger.

# Belangrijkste kenmerken

## ARMSTEUN

De armsteun ondersteunt de armen en het bovenlichaam en kan de zorgvrager helpen om zijn gewicht zowel bij de voeten als de schouders te dragen.

## PROACTIEVE KNIESTEUN

De proactieve kniesteun geeft ondersteuning en stabiliteit en maakt tegelijkertijd de natuurlijke voorwaartse beweging van de knieën en het buigen van de enkels mogelijk tijdens het gaan staan of zitten.

## VERWIJDERBARE VOETENPLAAT

Door de verwijderbare voetenplaat zijn stap- en looptraining mogelijk terwijl de zorgvrager gewoon op de vloer staat.



## DUBBELE BEDIENING

Dubbele bedieningsknoppen op de mast en de afstandsbediening. Dankzij de afstandsbediening heeft de zorgverlener meer bewegingsvrijheid en kan hij/zij dichterbij de zorgvrager blijven en tijdens het gehele proces goed oogcontact houden.

## WEEGUNIT (OPTIONEEL)

De weegunit kan worden gebruikt om zorgvragers te wegen en om te controleren hoeveel gewicht zij zelf kunnen dragen bij gebruik van de Sara Plus zonder voetenplaat.

## PRODUCTINFORMATIE

Max. veilige tilbelasting	190 kg	420 lb
Gewicht tillift (incl. accu)	78,7 kg	173,5 lb
Min. hoogte	1.195 mm	47 in
Minimale tilhoogte	906 mm	35 5/8 in
Maximale tilhoogte	1.497 mm	58 7/8 in
Externe breedte gesloten onderstel	646 mm	25 3/8 in
Externe breedte open onderstel	1.107 mm	44 in
Interne breedte gesloten onderstel	534 mm	21 in
Interne breedte open onderstel	1.002 mm	39 3/8 in
Vrije ruimte onderstel (van vloer tot bovenkant onderstel)	116 mm	4 1/2 in
Vrije ruimte onder het onderstel (van vloer tot onderkant onderstel)	30 mm	1 1/2 in
Totale lengte van de tillift	1.033 mm	40 5/8 in
Draaicirkel	1.235 mm	48 3/8 in
Beschermingsklasse tillift	IPX4	
Beschermingsklasse afstandsbediening	IPX7	
Accu	24 V, 6 Ah	

Acculaadindicator

Service-indicator - geeft de totale gebruikstijd (uren) aan

Noodstopknop en schakelaar voor omlaag brengen bij systeemuitval

Automatische veiligheidsuitschakeling als de tillift bij het omlaag brengen een obstakel raakt

Zwenkwielen met lage frictie, de achterste twee voorzien van rem

## ACCESSOIRES

Ruim assortiment aan wasbare, wegwerp- en afveegbare tilbanden verkrijgbaar

Toiletstoel

Voetenplaat smal

Voetenplaatverhoger

Kniesteun breed


Schapenvachthoes voor kniesteun

Fixatiebanden voor onderarmen

Fixatieband voor onderbenen

Optioneel: Geïntegreerde weegunit

## BENODIGDE RUIMTE

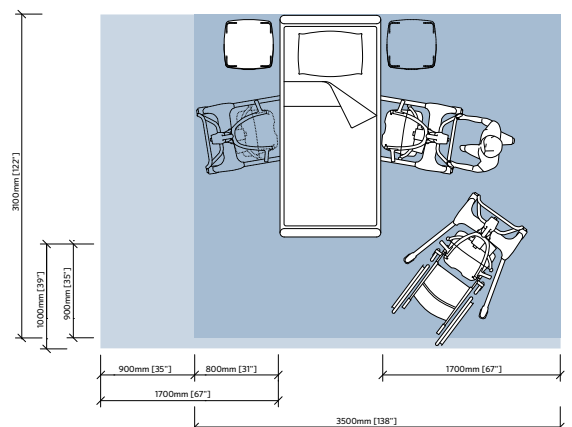

- Het blauwe gebied markeert de minimale werkruimte die de zorgverlener nodig heeft om op een ergonomisch verantwoorde manier vanaf één kant met het hulpmiddel te werken.
- Het lichtblauwe gebied markeert de benodigde extra werkruimte die de zorgverlener nodig heeft om aan beide zijden te kunnen werken met de het hulpmiddel en de zorgvrager goed te kunnen bereiken.