

ÖVERFLYTTNINGSPLATTFORM

# Sara® Stedy



Sara Stedy och Sara Stedy Compact gör det möjligt för en ensam vårdpersonal att hjälpa patienter att genomföra förflyttningar från sittande till stående hela dagen igenom.

## ARJOS MOBILITETSGALLERI



B © Arjo 2019

B. Rörlig till viss del men kan använda rullator/kryckor som stöd.  
Kontakta Arjo för mer information.

- **Främjar tidig mobilisering**  
Sara Stedy kan underlätta tidig mobilitet eftersom patienterna uppmuntras att delta mer aktivt vid förflyttningar från sittande till stående.
- **Finns i två storlekar**  
Sara Stedy gör det möjligt för en ensam vårdpersonal att förflytta patienter med olika kroppsstorlekar och kliniska behov från sittande till stående position.
- **Underlättar vardagliga förflyttningar**  
Sara Stedy och Sara Stedy Compact möjliggör trygga förflyttningar.
- **DSDC-ackrediterad produkt med demensdesign**  
Dementia Services Development Centre vid University of Stirling har granskat Sara Stedy och tillerkänt den en DSDC-produktackreditering klass 1B.



# Viktiga funktioner

## SARA STEDY

Utformad för patienter som är 149-193 cm långa och väger upp till 182 kg.

### TVÄRGÅENDE HANDTAG

Gör att patienten kan stödja sig själv genom att aktivt dra.

### FÄLLBAR SITS MED ÖPPNING

Den fällbara sitsen kan fällas ut så att patienten kan stå upp, och ger ett vinklat sittstöd under förflyttningen.

### KNÄSTÖD

Knästödet ger stöd från sittande till stående och dessutom för patientens ben under förflyttningen.

### CHASSISBEN SOM MANÖVRERAS MED PEDAL

Enkel justering för att passa breda stolar.



## SARA STEDY COMPACT

Utformad för mindre patienter som är 138-172 cm långa och väger upp till 182 kg.

## PRODUKTINFORMATION

	Sara Stedy	Sara Stedy Compact
Maximal säker arbetslast	182 kg	182 kg
Lyftens vikt	29,4 kg	28,3 kg
Lägsta totala höjd vid förvaring	1 050 mm	960 mm
Utvändig bredd med infällda ben	490 mm	490 mm
Utvändig bredd med utfällda ben	880 mm	880 mm
Invändig bredd hopfälda ben	360 mm	360 mm
Invändig bredd med utfällda ben	750 mm	750 mm
Benutrymme (golvet till benens ovasida)	100 mm	100 mm
Underredets markfrigång (från golvet till underredets undersida)	30 mm	30 mm
Lyftens totallängd	920 mm	890 mm
Vändradie	1 040 mm	1 020 mm

Lågfriktionshjul, bakre styrhjul med bromsar


Dementia Services Development Centre på University of Stirling har granskat denna produkt och bedömt dess design i förhållande till designprinciper för demensprodukter och dess användbarhet i en demensrelaterad miljö. Produktens lämplighet klassificeras med en siffra och en förklaring av dess användning, allt beskrivet enligt ett tillhandahållit verktyg. Logotypen för DSDC-ackrediterad produkter fås grundat på den enskilda produkten och betygsättningen. Denna ackreditering gäller inte produktens tillverkning eller slutanvändning. DSDC har bemödat sig om att tillförsäkra att betygsättningen reflekterar produktens lämplighet och användningsområde vid tidpunkten för publicering. DSDC kan dock inte hållas ansvariga för slutproduktens användning, dess prestanda eller dess verkan med andra produkter eller ytbehandlingar. För att en miljö ska anses vara "demensrelaterad" eller "demensvänlig" måste angränsande ytbehandlingars specifikationer, deras prestandaspecifikationer (till exempel ljusreflektionsvärde (LRV), halkmotstånd och mönster) och deras lämplighet för avsedd användning noggrant övervägas.

## TILLBEHÖR

Brett sortiment av tvättbara selar, engångsselar och avtorkningsbara selar tillgängligt

Arjo desinficeringsmedel

## UTRYMMESKRAV

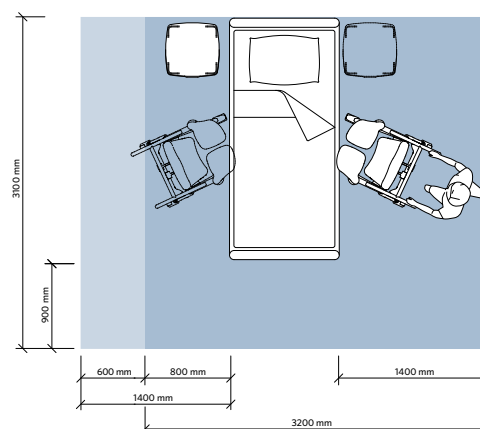

- Det blå området visar den minsta arbetsyta som krävs för att vårdpersonalen ska kunna använda de mekaniska hjälpmedlen på ett ergonomiskt sätt från ena sidan.
- Det ljusblå området visar hur långt arbetsytan måste utvidgas för att underlätta åtkomligheten för patienten, det mekaniska hjälpmedlet och vårdpersonalen från valfri sida.