

NIET-ELEKTRISCH OPSTAHULPMIDDEL

Sara[®] Stedy



Met de Sara Stedy en Sara Stedy Compact kan één zorgverlener een bewoner of zorgvrager gedurende de hele dag helpen bij transfers van zitten naar staan.

DE MOBILITEITSWIJZER VAN ARJO



B

© Arjo 2019

B. Deze zorgvrager is deels in staat om zelfstandig dagelijkse handelingen te verrichten en de hulp die zij daarbij nodig heeft is doorgaans niet fysiek belastend voor de zorgverlener.

Neem contact op met Arjo voor meer informatie.

- **Vroegtijdige mobilisatie bevorderen**
De Sara Stedy kan vroege mobiliteitsinitiatieven ondersteunen door zorgvragers aan te moedigen om actiever te zijn tijdens transfers van zitten naar staan.
- **Verkrijgbaar in twee maten**
Met de Sara Stedy kan één enkele zorgverlener helpen bij transfers van zitten naar staan bij zorgvragers met uiteenlopende gewichten en lengtes en klinische beoordelingen.
- **Vereenvoudigde dagelijkse transfers**
De Sara Stedy en Sara Stedy Compact zijn niet-elektrisch aangedreven hulpmiddelen.
- **Product met DSDC-productaccreditatie voor dementie-vriendelijk ontwerp**
Het Dementia Services Development Centre van de Universiteit van Stirling heeft aan de Sara Flex de DSDC-productaccreditatie-klasse 1B toegekend voor de bruikbaarheid in een dementie-vriendelijke omgeving.



Belangrijkste kenmerken

SARA STEDY

Ontworpen voor zorgvragers met een lengte van 149-193 cm en een gewicht van maximaal 182 kg.

DWARSBEUGEL

Hiermee kan de zorgvrager zichzelf ondersteunen door zich op te trekken.

OPENEN VAN HET WEGDRAAIBAAR ZITVLAK

Het zitvlak kan opzij worden gedraaid zodat de zorgvrager kan staan en biedt een schuine zitondersteuning tijdens de transfer.

ONDERBEEN-/KNIESTEUN

De onderbeen-/kniesteun helpt bij het omhoog komen naar een staande positie en ondersteunt de benen van de zorgvrager tijdens de transfer.

MECHANISCHE POTENSPREIDING MET BEHULP VAN PEDALEN

Gemakkelijk aan te passen aan brede stoelen.



SARA STEDY COMPACT

Ontworpen voor kleinere zorgvragers, met een lengte van 138-172 cm en een gewicht van maximaal 182 kg.

PRODUCTINFORMATIE

	De Sara Stedy	De Sara Stedy Compact
Max. veilige tilbelasting	182 kg	182 kg
Productgewicht	29,4 kg	28,3 kg
Min. hoogte bij opslag	1050 mm	960 mm
Externe breedte onderstel bij gesloten poten	490 mm	490 mm
Externe breedte onderstel bij volledig geopende poten	880 mm	880 mm
Interne breedte onderstel bij gesloten poten	360 mm	360 mm
Interne breedte onderstel bij volledig geopende poten	750 mm	750 mm
Vrije beenruimte (vloer tot bovenkant onderstel)	100 mm	100 mm
Vrije ruimte onder het onderstel (vloer tot onderkant van het onderstel)	30 mm	30 mm
Totale lengte van het hulpmiddel	920 mm	890 mm
Draaicirkel	1040 mm	1020 mm

Zwenkwielen met lage frictie, de achterste twee voorzien van rem


Het Dementia Services Development Centre (DSCD) van de Universiteit van Stirling heeft dit product beoordeeld en een score toegekend aan het ontwerp ervan in verhouding tot de ontwerpprincipes voor dementiezorg en de bruikbaarheid van het product in een dementievriendelijke en inclusieve omgeving. Voor een betere identificatie is de geschiktheid van het product ingedeeld per nummer met een bijbehorende uitleg over het gebruik, binnen de meegeleverde beoordelingsleutel. Het DSCD Accredited Product-logo wordt toegekend aan het individuele product en het kleurenschema. Deze accreditatie is niet van toepassing op de vervaardiging of de definitieve toepassing van het product. Hoewel alles in het werk gesteld is om te waarborgen dat de scores de geschiktheid en de toepassing van het product weerspiegelen bij het ter perse gaan, is DSCD niet aansprakelijk voor de toepassing, de prestaties of de wisselwerking met andere producten of afwerkingen van het eindproduct. Om ervoor te zorgen dat een omgeving 'inclusief' of 'dementievriendelijk' kan worden genoemd, moet extra aandacht worden besteed aan de specificatie van aangrenzende afwerkingen, de prestatie-eisen (bv. lichtreflectiewaarde (LRW), slipweerstand en gebruik van patronen) en de geschiktheid ervan voor het beoogde gebruik.

ACCESSOIRES

Ruim assortiment van wasbare, wegwerpbaar en afveegbare tilbanden beschikbaar

Arjo-desinfectiemiddelen

BENODIGDE RUIMTE

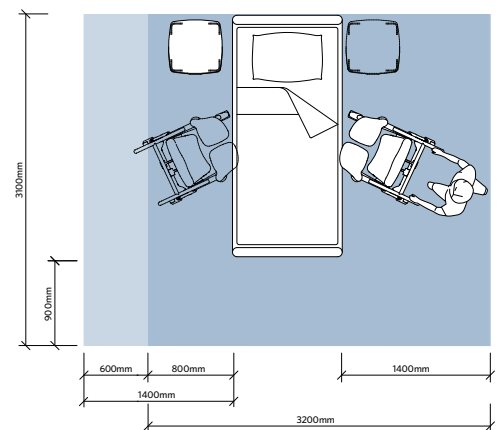

- Het blauwe gebied markeert de minimale werkruimte die de zorgverlener nodig heeft om op een ergonomisch verantwoorde manier vanaf één kant met het hulpmiddel te werken.
- Het lichtblauwe gebied markeert de benodigde extra werkruimte die de zorgverlener nodig heeft om aan beide zijden te kunnen werken met hulpmiddelen en de zorgvrager goed te kunnen bereiken.

November 2019. Gebruik uitsluitend Arjo-accessoires die speciaal voor dat doel zijn ontworpen bij door Arjo geleverde apparatuur en producten. We voeren een beleid dat is gericht op continue ontwikkeling en behouden ons daarom het recht voor ontwerpen en specificaties zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. ® en ™ zijn handelsmerken van de Arjo Groep.

Arjo AB · Hans Michelsengatan 10 · 211 20 Malmö · Sweden · +46 10 335 4500
Arjo Nederland BV · Biezenwei 21, 4004 MB Tiel · Postbus 6116, 4000 HC Tiel · Nederland · +31 (0) 344 64 08 00

Arjo.A00170.2.0.NL.NL

arjo