



Designet for
å gjøre daglige
forflytningsopp-
gaver lettere

STÅ- OG OPPREISINGSHJELPEMIDDEL

Sara® Flex - detaljer som gjør en forskjell

**Designet for å gjøre
daglige forflytnings-
oppgaver lettere**



Omsorg innebærer å være oppmerksom på detaljene

For oss i Arjo har 60 års erfaring lært oss at detaljer betyr alt.

De er forskjellen mellom komfort og smerte, en rolig pasient eller en redd pasient, en pleier som kan arbeide effektivt eller en pleier som alltid henger etter. Når man flytter en pasient fra sittende til stående stilling, utgjør detaljene hele forskjellen.

Sara® Flex fra Arjo er designet for å gjøre dagligdagse forflytnings- og pleieoppgaver lettere, og gir én pleier mulighet til å flytte en pasient fra sittende stilling til en trygg, sikker og komfortabel stående stilling i én ergonomisk bevegelse.

Det er detaljene som gjør forflytningene til en positiv opplevelse, uansett om det er til en rullestol, til toalettet, til en dusjstol eller om det handler om tidlig mobilisering etter kirurgi.



Carl mobilitetsnivå

SARA® FLEX er spesifikt designet for pasienter og beboere som ikke kan mobiliseres uten hjelp, men som kan bidra til handlingen eller utføre en del av handlingen selv. Kontakt Arjo for mer informasjon angående Mobilitetsgalleriet.



ALT STARTER MED EN OPTIMALISERT STILLING.
FRA EN TRYGG SITTEDE-TIL-STÅENDE STILLING

Tilrettelegging
av viktige daglige
forflytnings- og
pleieoppgaver.



Optimalisert pasientstøtte


Fremmer komfort og sikkerhet gjennom hele bevegelsen fra sittende til stående stilling

Enkel å bruke med forbedret manøvrerbarhet

Brukervennlighet takket være forbedret manøvrerbarhet og ingen behov for justering

Omfattende pasientdekning

Gir én pleier mulighet til å utføre sittende-til-stående-oppgaver for en rekke pasienter med Carl mobilitetsnivå

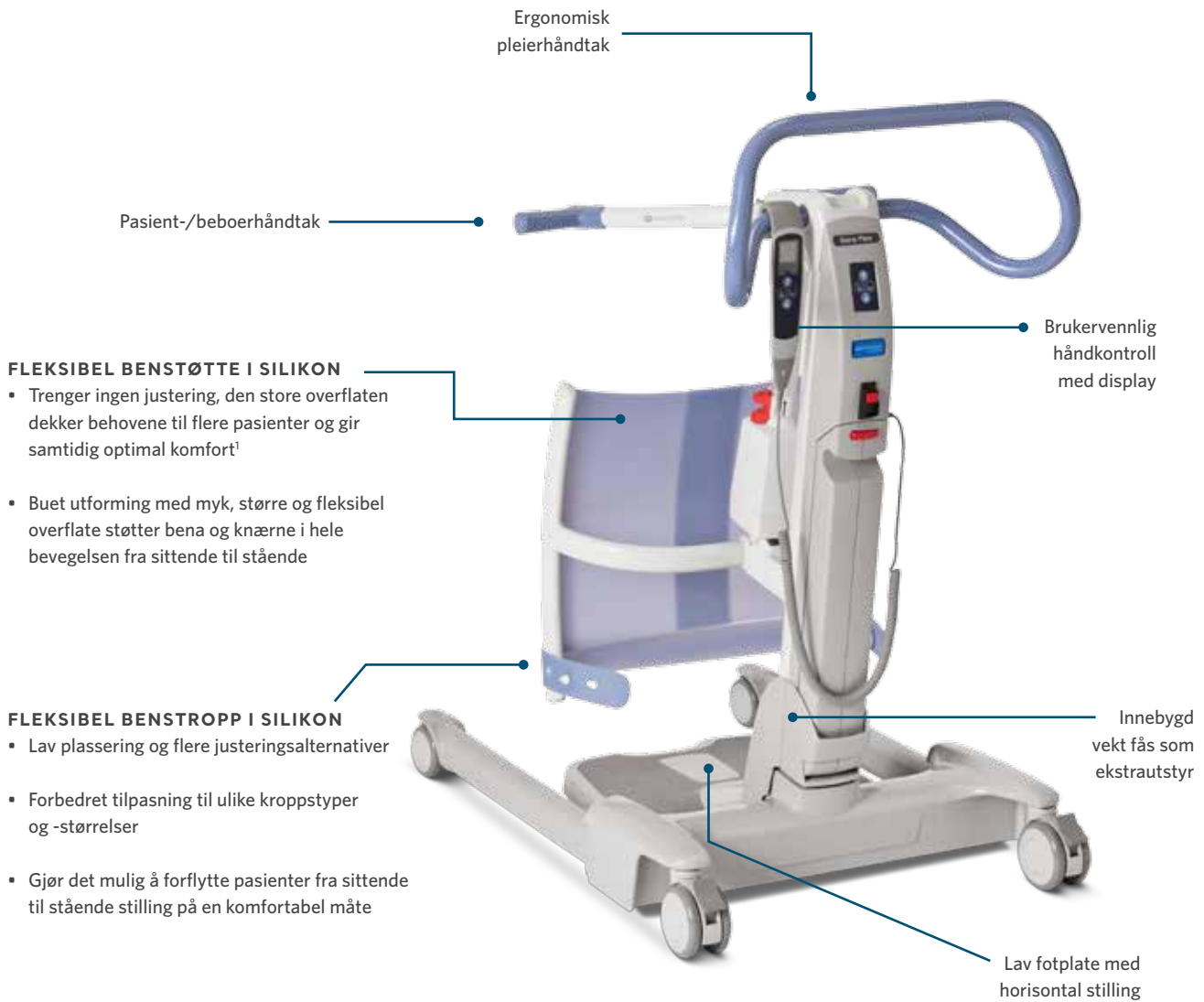

FLEKSIBEL BENSTØTTE I SILIKON

- Trenger ingen justering, den store overflaten dekker behovene til flere pasienter og gir samtidig optimal komfort!
- Buet utforming med myk, større og fleksibel overflate støtter bena og knærne i hele bevegelsen fra sittende til stående

FLEKSIBEL BENSTROPP I SILIKON

- Lav plassering og flere justeringsalternativer
- Forbedret tilpasning til ulike kroppstyper og -størrelser
- Gjør det mulig å forflytte pasienter fra sittende til stående stilling på en komfortabel måte

Ergonomisk bevegelse forover

- Bevegelse forover, i kombinasjon med den fleksible benstøtten, gir en ergonomisk og komfortabel sittende-til-stående-bevegelse!

Liten og lett

- Gir Sara Flex en optimal størrelse som ikke er påtrengende, og som er egnet for behovene til pasienter som ellers ville blitt skremt av stort og tungvint håndteringsutstyr
- Har en estetisk utforming som sikrer at sårbare pasienter beholder roen i løpet av forflytning fra sittende til stående stilling

Lav fotplate med horisontal stilling

- Tilrettelegger for en sittende-til-stående-bevegelse som er spesifikt utviklet for å føles problemfri og naturlig for pasienten
- Gir enkel benplassering samtidig som den støtter og forbedrer sittende-til-stående-bevegelsen

Brukervennlig håndkontroll med display

- Gjør sittende-til-stående-oppgaven rask, minimalt anstrengende og uproblematisk
- Gjør det mulig for pleierne å samarbeide tett med pasienten og intuitivt lese av vekten og manøvrere løfteren



Pasienthåndtak

- Pasienthåndtaket er vinklet og lett å gripe, og bidrar til komfortabel plassering av hender, håndledd og albuer i hele sittende-til-stående-bevegelsen

Pleierhåndtak

- Flexibelt grep med intuitiv ergonomisk effektivitet

Produktspesifikasjoner

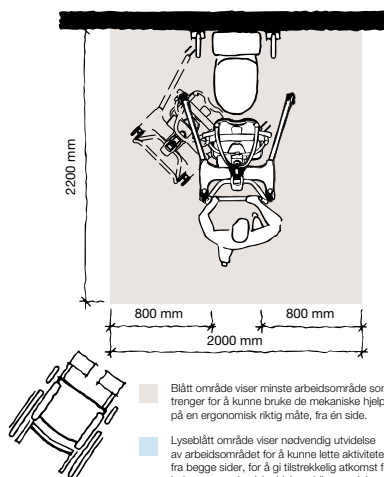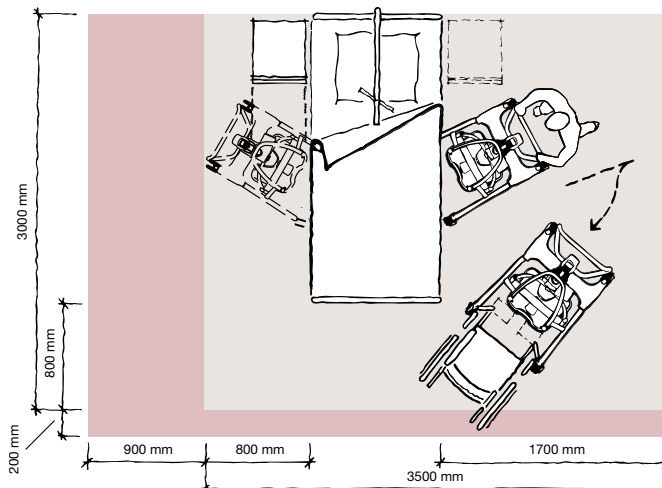

Produktinformasjon

Maks sikker arbeidsbelastning	200 kg
Vektkapasitet	200 kg
Vekt	52 kg
Vekt inkludert vekt	53,6 kg
Total lengde	996 mm
Min. løftehøyde	991 mm
Maks løftehøyde	1518 mm
Total høyde	1162 mm
Høyde på understell	100,5 mm
Utvendig bredde med lukkede ben	660 mm
Utvendig bredde med åpne ben	1029 mm
Batteri	24V DC 4Ah
Løfter, beskyttelsesklasse	IP24
Håndkontroll, beskyttelsesklasse	IPX7
Lavfrikjonshjul, de to bakre med brems	
Batteriindikator - viser hvor mye strøm som er igjen og når batteriet må lades	
Serviceindikator - viser motorens totale driftstid	
Nødstoppfunksjon og overstyring av systemsvikt	

Ekstrautstyr

Innebygd vekt

Godkjenninger

EN/IEC 60601-1 (TÜV SÜD)

EN ISO 10535:2006 (TÜV SÜD)

Mobilitetsgalleriet

Egner seg for Carl



C Carl, som sitter i rullestol og har liten evne til å holde seg selv oppreist

Ta kontakt med Arjo hvis du ønsker flere opplysninger om Mobilitetsgalleriet.



Omsorg innebærer å være opp- merksom på detaljene

Referanser: 1. Fray M et al. (2018) An evaluation of sit to stand devices for use in rehabilitation (whitepaper)

Utstyr og produkter som leveres av Arjo krever bruk av originale deler fra Arjo, som er laget spesielt for formålet. Vår policy er å drive en kontinuerlig produktutvikling, og vi forbeholder oss derfor retten til å endre design og spesifikasjoner uten forutgående varsel.

® og ™ er varemerke som tilhør Arjo-konsernet. © Arjo, mars 2018.

Hos Arjo forplikter vi oss til å forbedre dagliglivet til mennesker med redusert bevegelighet og aldersrelaterte helseutfordringer. Vi leverer produkter og løsninger som sikrer ergonomisk pasienthåndtering, personlig hygiene, desinfisering, diagnostikk og effektiv forebygging av trykksår og venøs tromboembolisme, som hjelper fagfolk i alle typer pleiemiljø med hele tiden å heve standarden for sikker og verdig pleie. Alt vi gjør, gjøres med mennesker i fokus.

Arjo AB • Hans Michelsensgatan 10 • 211 20 Malmö • Sweden • +46 10 335 4500

www.arjo.com