

Sara® Stedy



Sara Stedy og Sara Stedy Compact gir én enkelt pleier mulighet til å hjelpe pasienter eller beboere å forflytte seg til sittende eller stående stilling gjennom hele dagen.

ARJOS MOBILITETSGALLERI



B

© Arjo 2019

B. Oppegående til en viss grad, men bruker kanskje gåstol/krykker til støtte.

Kontakt Arjo hvis du ønsker mer informasjon.

- **Fremmer tidlig mobilisering**
Sara Stedy kan muliggjøre tidlig mobilisering ved å oppmuntre pasientene og beboerne til å være aktive under forflytning fra sittende til stående stilling.
- **Tilgjengelig i to størrelser**
Sara Stedy gjør det mulig for én enkelt pleier å hjelpe pasienter og beboere fra sittende til stående stilling gjennom hele dagen. Sara Stedy finnes i to ulike størrelser.
- **Enklere forflytning i hverdagen**
Sara Stedy og Sara Stedy Compact er manuelle forflytningshjelpemidler.
- **Produkt med DSDC-demensklassifisering**
Dementia Services Development Centre ved University of Stirling har vurdert Sara Stedy og gitt den DSDC-produktklassifisering i klasse 1B.



Viktige funksjoner

SARA STEDY

Designet for pasienter og beboere med en høyde på 149-193 cm (4'11"-6'6") og med en vekt på opptil 182 kg (400 lb).

TVERRSTANGHÅNDTAK

Gjør at pasienten/beboeren kan støtte seg selv aktivt ved å trekke seg opp.

DREIBAR SETEÅPNING

Det dreibare setet kan flyttes bort slik at pasienten/beboeren kan stå, og gir vinklet sittende støtte under forflytningen.

KNESTØTTE

Kneputen gir støtte ved oppreisning, og støtter også pasientens/beboerens ben under forflytningen.

PEDALBETJENTE UNDERSTELLBEN

Enkel justering for tilkomst til brede stoler.



SARA STEDY COMPACT

Designet for mindre pasienter og beboere med en høyde på 138-172 cm (4'6"-5'8") og en vekt på opptil 182 kg (400 lb).

PRODUKTINFORMASJON

	Sara Stedy	Sara Stedy Compact
Maks sikker arbeidsbelastning	182 kg/400 lb	182 kg/400 lb
Løfterens vekt	29,4 kg/64,82 lb	28,3 kg/62,5 lb
Min. totale oppbevaringshøyde	1050 mm/ 41 1/2 tommers	960 mm/ 37,8 tommers
Utvendig bredde med lukkede ben	490 mm/ 19 1/2 tommers	490 mm/ 19 1/2 tommers
Utvendig bredde med bena helt åpne	880 mm/ 34 3/4 tommers	880 mm/34 3/4 tommers
Innvendig bredde lukkede ben	360 mm/ 14 1/2 tommers	360 mm/ 14 1/2 tommers
Innvendig bredde med bena helt åpne	750 mm/ 29 1/2 tommers	750 mm/ 29 1/2 tommers
Klaring ben (gulv til overside av ben)	100 mm/ 3 7/8 tommers	100 mm/ 3 7/8 tommers
Understelllets gulvklaring (gulv til undersiden av understellet)	30 mm/ 1 1/2 tommers	30 mm/ 1 1/2 tommers
Løfterens totale lengde	920 mm/ 36 1/2 tommers	890 mm/ 35 tommers
Svingradius	1040 mm/ 41 tommers	1020 mm/ 40 1/2 tommers

Lavfriksjonshjul, de to bakre med bremses


Dementia Services Development Centre (DSDC) ved University of Stirling har vurdert dette produktet, og har klassifisert designet i forhold til designprinsipper for demens og brukbarhet i et demensvennlig miljø. For enkel identifisering er produktets egnethet klassifisert med et tall med tilhørende bruksforklaring, innenfor de oppgitte klassifiseringsnøklerne. DSDC Accredited Product-logoen tildeles på grunnlag av det enkelte produktet og fargevalg. Denne akkrediteringen er ikke forbundet med produksjonen eller produktets endelige bruksområde. Selv om alt er gjort for å sikre at klassifiseringene gjenspeiler produktets egnethet og aktuelle bruk på trykkesidspunktet, kan ikke DSDC holdes ansvarlig for det endelige produktets bruksområde, dets ytelse eller grensesnitt mot andre produkter eller finisher. For at et miljø skal kunne anses som "demensinkluderende" eller "demensvennlig", må spesifikasjonene vedrørende tilleggende finisher, ytelseespesifikasjon (for eksempel lysrefleksverdi (LRV), sklisikkerhet og bruk av mønster) og deres egnethet for bruksformålet, vurderes nøye.

TILLEGGSTUTYR

Stort utvalg av vaskbare seil, engangsseil og avtørkbare seil

Arjo desinfeksjonsmidler

PLASSBEHOV

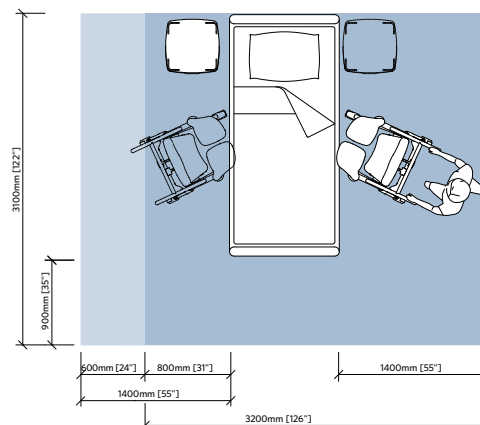

- Det blå området viser minste arbeidsområde som kreves for at pleieren skal kunne bruke det mekaniske hjelpemiddelet på en ergonomisk måte fra én side.
- Det lyseblå området viser hvor mye arbeidsområdet må utvides for å tilrettelegge for aktiviteter på begge sider, for å gi tilstrekkelig tilgang for pasienten, det mekaniske hjelpemiddelet og pleieren.

November 2019. Utstyr og produkter som leveres av Arjo krever bruk av originale deler fra Arjo, som er laget spesielt for formålet. Vår policy er å drive en kontinuerlig produktutvikling, og vi forbeholder oss derfor retten til å endre design og spesifikasjoner uten forutgående varsel. © og ™ er varemerke som tilhør Arjo konsernet.

Arjo AB • Hans Michelsensgatan 10 • 211 20 Malmö • Sweden • +46 10 335 4500
Arjo Norge AS • Olaf Helssets vei 5 • 0694 • Oslo • Norway • +47 22 08 00 50

Arjo.A00170.2.0.NO.NO

arjo