


DEKUBITUSPROPHYLAXE

Simulflex™


Schaumstoffmatratzen-Sortiment

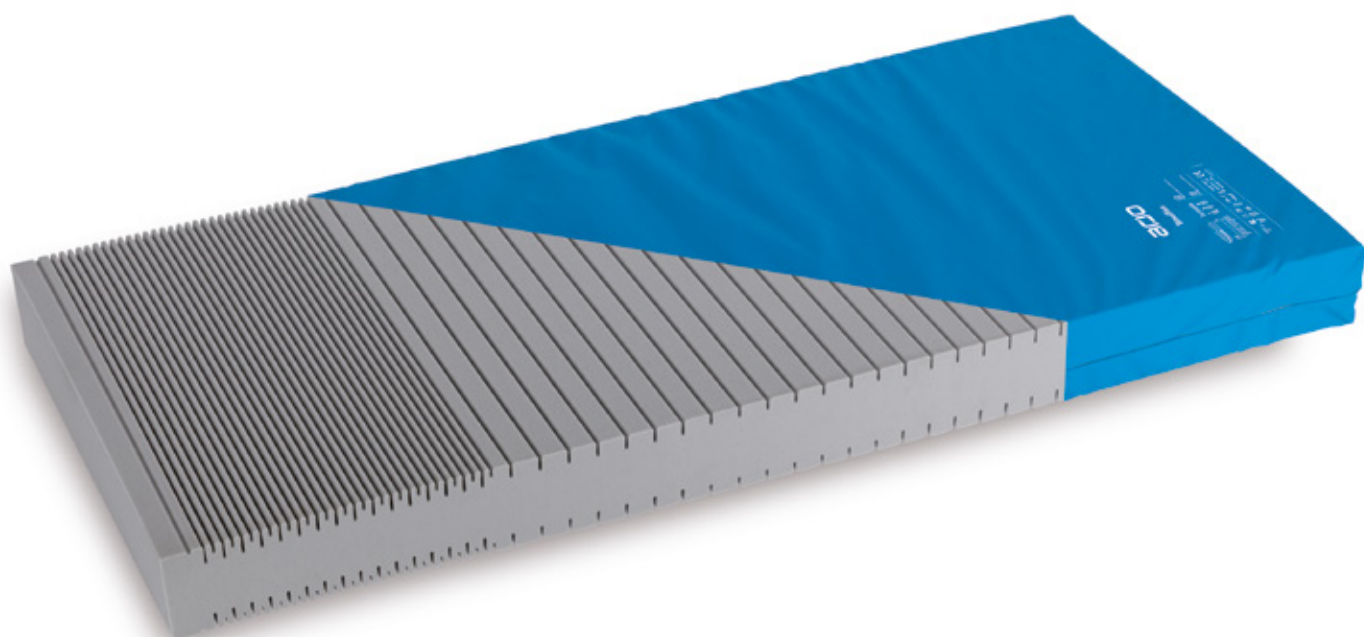

Die Simulflex Produktreihe wurde für die 24-Stunden-Versorgung entwickelt. Das Sortiment umfasst Matratzenersatz, Matratzenauflagen und Sitzkissen.

Simulflex™ Produktreihe

Diese Produktreihe besteht aus hochwertigem Polyurethanschaum und ist in verschiedenen Größen erhältlich. Die Auflage verfügt außerdem über Befestigungsbänder an den Ecken für zusätzliche Sicherheit.

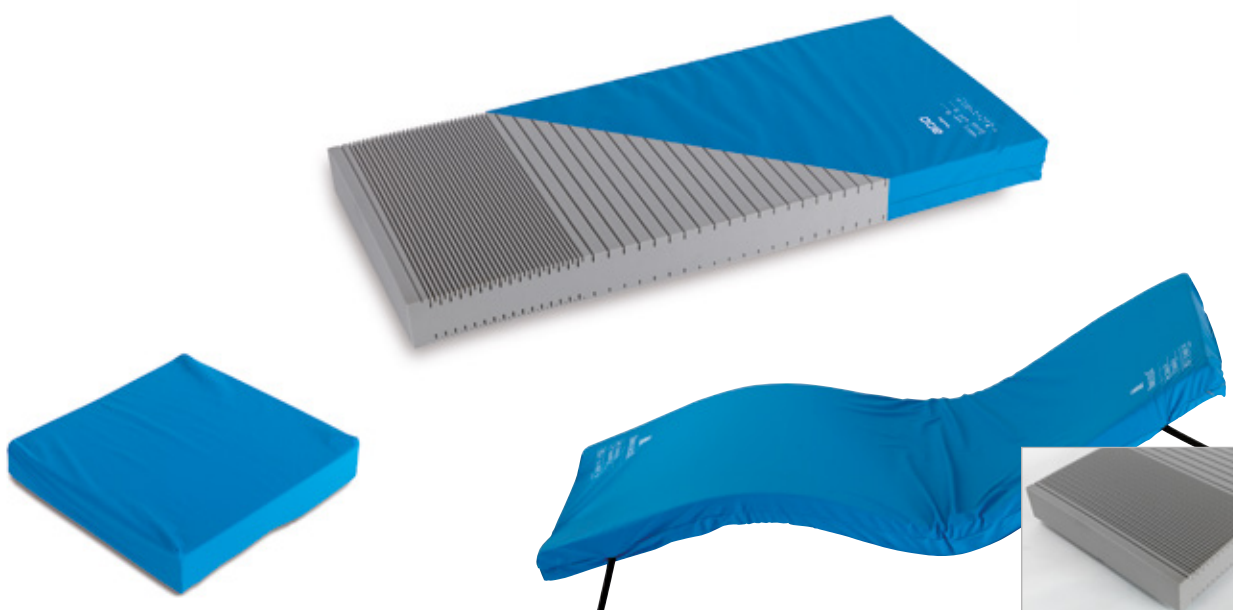

24-Stunden-Pflegepaket - Sitzkissen erhältlich

Auflagesystem - Eine Matratzenauflage ist ebenfalls erhältlich und einfach anzubringen

Komfort und Sicherheit im Vordergrund


Geeignet für die Verwendung in vielen unterschiedlichen Pflegeumgebungen, einschließlich in Krankenhäusern und in der häuslichen Pflege.

Sicher und bequem für Patienten und Pflegekräfte

Die Simulflex Produktreihe wurde für eine zuverlässige Druckumverteilung entwickelt.


Merkmale des Bezugs

- Zwei-Wege-Stretch
- Wasserdampfdurchlässig
- Wasserabweisend
- Die Infektionskontrolle wird durch die antimikrobiellen Eigenschaften des Bezugsmaterials unterstützt
- Leicht zu reinigen und zu pflegen
- Verdeckter Reißverschluss
- Deutlich gekennzeichnete Bezüge mit TurnTable™ Anleitung und Waschanweisungen

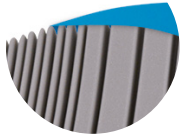


ANATOMISCH INSPIRIERTE ZONEN

Mit horizontal geschnittenem Schaum für drei Druckverteilungszonen.

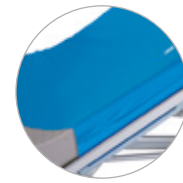

VERDECKTER REISSVERSCHLUSS

Der Bezug hat einen verdeckten Reißverschluss, um die Verfahren zur Infektionsprävention zu unterstützen.

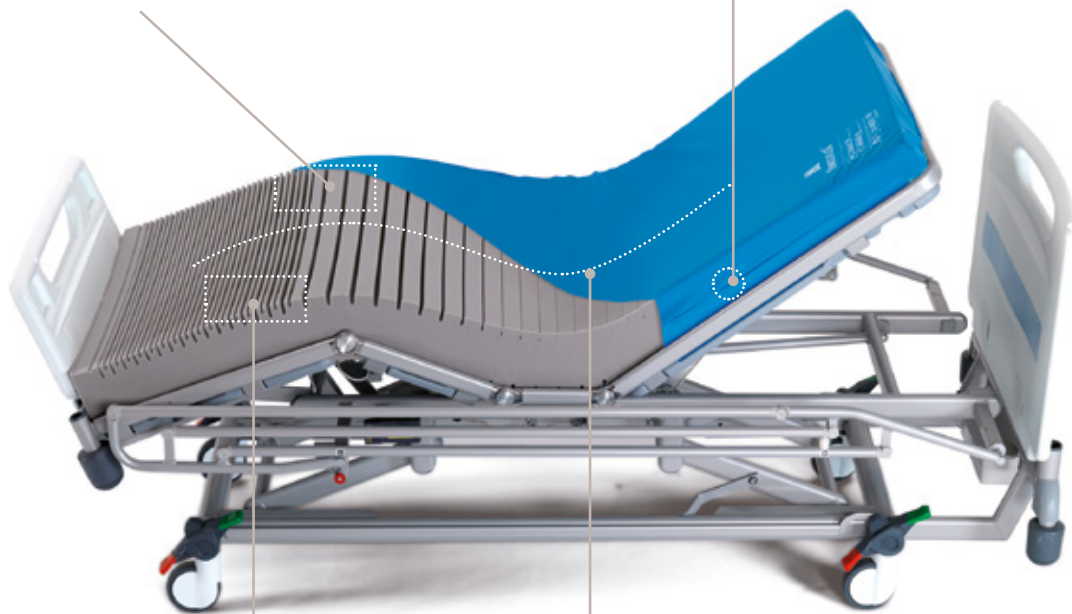

KOPF- UND FERSENZONEN

In der Kopf- und Fersenzone befinden sich kleinere Schnitte im Schaumstoff, um den Komfort für den Patienten zu verbessern.



GEEIGNET FÜR BETTEN MIT PROFILRAHMEN

Geeignet für die Anwendung in sitzender Position oder Rückenlage.

Simulflex

Turntable

1	5	9
12	12	12

BS 6857 / 2006, 01
 BS EN 1217-1 / 12
 BS EN 1217-2 / 12

TurnTable Anleitung - Alle Simulflex Matratzensersatzsysteme beinhalten die TurnTable Anleitung

Technische Daten*

4-WEGE-WENDE-MATRATZENERSATZ	ABMESSUNGEN H X B X T**	BESTELLNUMMER
MR Standard	1980 x 860 x 150 mm	120SX198/086
MR Community	1900 x 920 x 150 mm	120SX190/092
MR Contoura	1820 x 780 x 150 mm	120SX182/078
Max. Patientengewicht	120 kg	
Lebensdauer: 5 Jahre für Schaum und 2 Jahre für Bezug		
Auflagesystem		
OL Standard	1980 x 860 x 85 mm	SO198/086
OL Community	1900 x 920 x 85 mm	SO190/092
Sitzkissen		
Sitzfläche	430 x 430 x 70 mm	SS043/043
Benutzergewichtsgrenze:	90 kg	
Feuerfestigkeit des Matratzensatzes		
Das Matratzensatzsystem erfüllt BS EN 597 -1: 1995, BS EN 597 -2: 1995 und BS 6807: 1996, Abschnitt 2, Zündquellen 0,1 und 5 Das Auflagesystem erfüllt BS EN 597-1: 1995, BS EN 597 -2: 1995 und BS 6807: 1996, Abschnitt 2, Zündquellen 0,1 und 5		
Röntgenstrahlen	Geprüft nach FDA 21 CFR Ch. 1 (4-1-95 Edition) HHS und CEI/IEC 601-1-3:1994-07 (Röntgendämpfung)	
Herz-Lungen-Reanimation	Die Thoraxkompression zu Zwecken der Herz-Lungen-Reanimation wird nicht beeinträchtigt	

*Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten

**Simulflex Matratzen sind in anderen Sondergrößen erhältlich. Alle Größen sind in 2 cm Schritten anzugeben

Oktober 2019 Alle Produkte tragen das CE-Zeichen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass im Zusammenhang mit den von Arjo gelieferten Geräten und zur Vorbeugung von Verletzungen, die durch die Verwendung von Fremdteilen auftreten könnten, nur Arjo Originalteile verwendet werden dürfen. Bei Nichtbeachtung dieses Hinweises übernehmen wir entsprechend unserer Verkaufsbedingungen keinerlei Haftung. Da wir unsere Erzeugnisse ständig weiterentwickeln, behalten wir uns das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor. ® und ™ sind eingetragene Markenzeichen der Arjo Firmengruppe. © Arjo, 2019

Wir bei Arjo sind überzeugt, dass „Empowering Movement“ (Bewegung stärken) in Gesundheitseinrichtungen für eine qualitativ hochwertige Pflege von entscheidender Bedeutung ist. Unsere Produkte und Lösungen sind darauf ausgelegt, eine sichere und würdevolle Erfahrung durch Transfer, medizinische Betten, Körperhygiene, Desinfektion, Diagnostik sowie Prävention von druckbedingten Verletzungen und venöser Thromboembolie zu fördern. Wir beschäftigen mehr als 6000 Menschen weltweit und verfügen über mehr als 60 Jahre Erfahrung im Umgang mit Patienten/Bewohnern und medizinischem Fachpersonal. Außerdem setzen wir uns für bessere klinische Ergebnisse für Menschen ein, deren Mobilität beeinträchtigt ist.

Arjo AB · Hans Michelsengatan 10 · 211 20 Malmö · Sweden · +46 10 335 4500

Arjo Deutschland GmbH · Peter-Sander-Straße 10 · 55252 Mainz-Kastel · Deutschland · +49 6134-186 0

Arjo AG · Fabrikstrasse 8/Postfach · 4614 Hägendorf · Schweiz · +41 (0) 61 337 97 77

Arjo Austria GmbH · Lemböckgasse 49A · 1230 Wien · Österreich · +43 (1) 866 56

www.arjo.com