

HÖJ- OCH SÄNKBAR BADSTOL MED TILTRÖRELSE

Symbliss® badstol



Symbliss badstol är en del av ett integrerat badsystem för patienter med olika mobilitetsnivåer. Dess unika design gör det möjligt för vårdpersonal att **effektivt** och **säkert** tillhandahålla en hygienlösning som främjar hälsosammare resultat. En paus av **välbefinnande** och komfort för kropp och själ.

ARJOS MOBILITETSGALLERI



A

B

C

D

E



Symbliss® bad och badstol tilldelade DSDC-ackreditering klass 1A

*Beroende på mobilitetsnivå

- Symbliss badstol har en unik tiltrörelse och ett benstöd som möjliggör badning på olika mobilitetsnivåer med minimala förflyttningar. Den underlättar effektivt bad, dusch och transport samt på- och avklädning* av patienter.
- Symbliss badstol kan justeras i höjdläge och lutning, vilket ger en ergonomisk arbetsställning och enkel åtkomst till patienten. Ryggstödet med fullt stöd och sitsen i lutande läge gör att patienten kan sitta säkert och minimerar risken för att patienten glider eller flyter under badningen.
- Symbliss badstol främjar värdighet och komfort och bidrar till att minska orosmoment under vårduppgifter. Den är utformad efter evidensbaserade demensprinciper och påminner vad gäller utseende och proportioner om en vanlig stol inom dagvården. Badstolen är försedd med QuietConcept™ med mjuka och tysta rörelser.

Viktiga funktioner

STÄLLBAR I HÖJD

För en ergonomisk arbetsställning

ÄNDLASTAD

För ergonomisk åtkomst till patienten

DJUPINDIKATOR

Ger vägledning för optimal nedsänkning

MANÖVERHANDTAG

För transport och omplacering

CENTRALBROMS (TILLVAL)

Omedelbar inbromsning via handkontrollen

RENGÖRING OCH DESINFICERING

Avtagbara armstöd, benstöd och slät yta för främjande av infektionsförebyggande rutiner

HEMLIKNANDE DESIGN

Traditionell form som påminner om en vanlig stol inom dagvården

RYGGSTÖD OCH SITS I FULL LÄNGD

Omsluter och stödjer patientens kropp. Konstruktion i ett stycke för ökad komfort

TILLBEHÖR

Sitt- och ryggstödsklädsel, nackkudde, vadderade säkerhetsbälten och bäcken med hållare för komfort och säkerhet

FÄLLBARA OCH AVTAGBARA ARMSTÖD

Unik design för patientsäkerhet och sittkomfort

FÄLLBART OCH AVTAGBART BENSTÖD

För stöd av patientens ben och för att man inte ska behöva lyfta patientens ben manuellt över badkarskanten



ELDRIVEN TILTRÖRELSE

Runt patientens tyngdpunkt för bekväm och säker positionering



HANDKONTROLL

Med display som tillhandahåller information som bland annat säker arbetslast, patientvikt och meddelanden

TILLBEHÖR OCH DELAR

Säkerhetsbälte	Öglor för enkel och säker fastsättning och längdjustering. Ett säkerhetsbälte ingår oavsett konfiguration
Bältesvaddering	Avtorkningsbar bältesvaddering för extra komfort
Nackstöd	Avtorkningsbar huvud- och nackkudde med fästrem
Sitsklädsel	Två typer av avtorkningsbar sitsklädsel, med eller utan toalettöppning
Ryggstödsklädsel	Avtorkningsbar ryggstödsklädsel för ökad komfort
Bäcken och hållare	Utformad för att vara enkel att sätta i/ta ur (möjliggör toalettbesök i stol)
Batterier	Levereras med två uppladdningsbara batterier som standard



KONFIGURATIONER

	Manuella fotbromsar	Nackstöd	Centralbroms	Integrerad klass III-våg
SymbliSS badstol	•			
SymbliSS badstol Comfort		•	•	
SymbliSS badstol Comfort med våg		•	•	•



PRODUKTINFORMATION


Max brukarvikt, SWL	200 kg
Totalvikt för lyften – SymbliSS badstol Comfort med våg	93 kg
Totalbredd	703 mm
Total längd (centralbroms)	
Upprätt läge	1 260 mm
Tiltläge	1 315 mm
Totallängd (fotbroms)	
Upprätt läge	1 283 mm
Tiltläge	1 338 mm
Sitthöjd lägsta läge (upprätt)	500 mm
Lyfthöjd (sits)	500 mm
Utrustningens maxhöjd (upprätt, upphöjd)	1 940 mm
Utrustningens minimihöjd min. (tiltad, sänkt)	1 178 mm
Max. bredd chassis	672 mm
Fri höjd under chassit	93–128 mm
Vändradie	
Benstöd nedfällt	1 390 mm
Benstöd uppfällt	1 700 mm
Matningsspänning	24 V
Kapslingsklass	IPX4
Handkontrollens kapslingsklass	IPX7
Ljudnivå hög/låg	33 dB(A) (utan belastning, 1 m från källan)
Ljudnivå lutning	41 dB(A) (utan belastning, 1 m från källan)




Konstruktionspecifikation

UTRYMMESKRAV

FÖRFLYTTNING

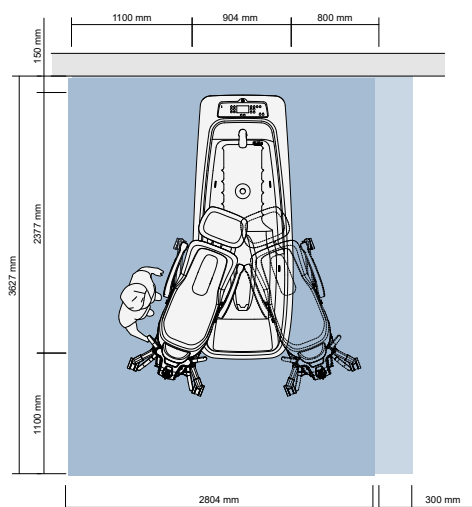

PÅ PLATS

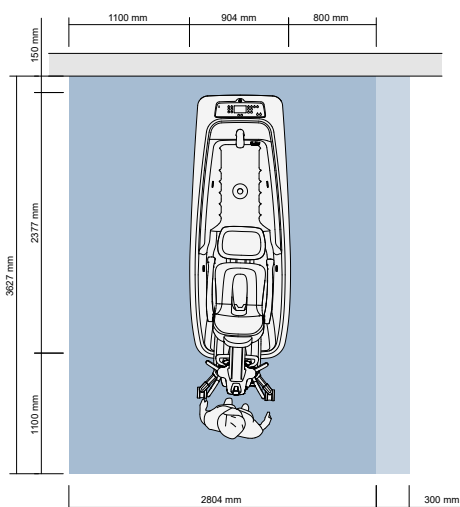

- Det blå området visar den minsta arbetsyta som krävs för att personalen ska kunna använda hjälpmedlen på ergonomiskt rätt sätt från ena sidan.
- Det ljusblå området visar hur mycket arbetsytan måste utvidgas för att underlätta åtkomligheten från valfri sida.

Mer information om installationskrav finns på arkitektportalen på www.arjo.com

KOMPATIBILITET MED ANDRA ENHETER

Badkar	Stå- och lyfthjälpmedel	Passiva lyftar
Symbliiss badkar	Sara Steady	Maxi Move
	Sara Flex	Maxi Twin
	Sara 3000	Maxi 500
	Sara Plus	Taklyftar



Dementia Services Development Centre på University of Stirling har granskat denna produkt och bedömt dess design i relation till designprinciper för demensprodukter och dess användbarhet i en demensrelaterad miljö. Produktens lämplighet klassificeras med en siffra och en förklaring av dess användning, allt beskrivet enligt ett tillhandahållit verktyg. Logotypen för DSDC-ackrediterad produkter fås grundat på den enskilda produkten och betygssättningen. Denna ackreditering gäller inte produktens tillverkning eller slutanvändning. DSDC har bemödat sig om att tillförsäkra att betygssättningen reflekterar produktens lämplighet och användningsområde vid tidpunkten för publicering. DSDC kan dock inte hållas ansvariga för slutprodukternas användning, dess prestanda eller dess verkan med andra produkter eller ytbehandlings. För att en miljö ska anses vara "demensrelaterad" eller "demensvänlig" måste angränsande ytbehandlings specifikationer, deras prestandaspecifikationer (till exempel ljusreflektionsvärde (LRV), halkmotstånd och mönster) och deras lämplighet för avsedd användning noggrant övervägas.