

Evenda Comfio




La gamme de lits Evenda^{MD} répond aux besoins des résidents et des soignants en soins de longue durée dans un modèle domestique. La gamme de lits comprend trois modèles : Movenio, Comfio et Sereno, qui fournissent des solutions personnalisables en fonction des difficultés individuelles des résidents et des préférences de l'établissement.

Conçu pour assurer des soins sûrs et efficaces pour les résidents immobilisés, Evenda Comfio reconnaît l'impact que la perte de mobilité peut avoir sur l'indépendance du résident.

- 4 grandes roulettes avec frein central pour faciliter le transport dans le lit
- Rails flexibles et rabattables aux 3/4
- Repose-pieds avec barre d'accessoires. Les pompes de matelas peuvent être fixées de sorte que les crochets ne dépassent pas dans l'espace du lit

Caractéristiques et options

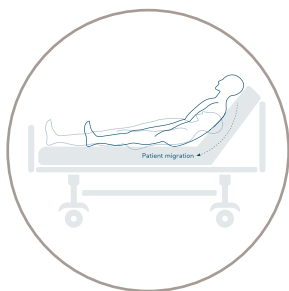

L'autorégession minimise la pression, le cisaillement et la friction pendant le profilage du lit



Incroyable protection contre les chutes avec une faible hauteur du sommier de 6,7 po



Le personnel soignant peut facilement ajuster le lit en position de chaise complète avec notre panneau de commande simple d'utilisation



Télécommande rétroéclairée avec couleurs contrastées et verrouillages pouvant être fixés au pied de lit



Les veilleuses standard situées de part et d'autre du lit éclairent pour guider les résidents lorsqu'ils quittent le lit dans une pièce mal éclairée



Télécommande simplifiée en option avec grandes icônes et couleurs contrastées

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT - COMFIO

Longueur standard hors tout	2 150 mm
Largeur hors tout	1040 mm
Longueur standard du matelas	1 980 à 2 000 mm
Largeur du matelas	900 mm
Longueur rallongée hors tout	Position 1 : 2 200 mm Position 2 : 2 300 mm
Longueur du matelas avec extension	Position 1 : 2 100 mm Position 2 : 2 200 mm
Longueur courte hors tout	2 030 mm
Hauteur maximale	800 mm ou 825 mm
Hauteur faible	310 mm ou 335 mm

DIMENSIONS HORS TOUT - COMFIO

Longueur section dossier	800 mm
Longueur de l'assise	245 mm
Longueur de la section du mollet	500 mm
Longueur de la section de la cuisse	285 mm
Capacité maximale admissible/ Poids maximum du patient	507 lb/430 lb
Déclive	12°
Proclive	12°
Angle du dossier	70°
Pause du dossier	30°, 45°
Angle du relèvement-cuisse	40°
Angle du relèvement-jambe	0°-18°
Protection contre la pénétration	IP24
Protection contre les chocs	Classe 1 ou classe 2, type B
Alimentation électrique	100-240 V 50/60 Hz, max. 3,9 A
Normes de sécurité	CEI 60601-2-52