

Walker®



Walker offre il supporto necessario per fare i primi passi, sia per il paziente o residente sia per il fisioterapista.

GALLERIA DELLA MOBILITÀ ARJO



B © Arjo 2019

B. Può camminare fino a un certo punto, ma potrebbe aver bisogno di un deambulatore/stampelle per sostenersi.

Per ulteriori informazioni contattare Arjo.

- **I primi passi**
Un ausilio di esercitazione per palestre, reparti o aree di trattamento, che fornisce le condizioni sicurezza per fare i primi passi.
- **Funzione solleva-abbassa**
La funzione solleva-abbassa riduce il rischio durante il trasferimento sia per il paziente/residente che per il fisioterapista, quando si solleva/si abbassa il paziente verso o da una posizione eretta.
- **Caratteristiche di comfort e sicurezza**
Il paziente/residente può afferrarsi saldamente alle impugnature regolabili, mentre la tavola poggia braccia ad U lo sostiene e le cinghie posteriori di sospensione ne impediscono la caduta.
- **Dispositivo direzionale e freni**
Il dispositivo direzionale aiuta il paziente/residente a camminare in linea retta. Le ruote di Walker sono provviste di freni.
- **Libero accesso**
Grazie ai lati aperti di Walker, il fisioterapista ha libero accesso ai fianchi, alle ginocchia e alle caviglie del paziente per assisterlo durante gli esercizi per la deambulazione.

Caratteristiche principali

TAVOLA DI SUPPORTO PER ARTI SUPERIORI

La morbida tavola di supporto a U è una superficie stabile su cui appoggiarsi.

PALETTA DI SOSTEGNO

Una volta che il paziente/residente è in posizione eretta, la palette di sostegno può essere facilmente rimossa.



IMPUGNATURE

Impugnature regolabili a cui il paziente/residente può saldamente afferrarsi.

PULSANTIERA DI CONTROLLO

Walker è provvisto di una pulsantiera di controllo che consente al fisioterapista di rimanere vicino al paziente/residente.

DISPOSITIVO DIREZIONALE

Il dispositivo direzionale aiuta il paziente a camminare in linea retta e facilita il trasporto lungo il corridoio.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO


Carico di Lavoro Sicuro (SWL)	136 kg	300 lb
Peso del sollevapazienti (batteria incl.)	53 kg	117 lb
Altezza minima totale per lo stoccaggio	1.165 mm	45 7/8"
Larghezza esterna con chassis chiuso	843 mm	33 1/4"
Larghezza interna con chassis chiuso	694 mm	27 3/8"
Altezza max dello chassis (dal pavimento al punto più alto dello chassis)	165 mm	6 1/2"
Altezza sotto lo chassis (dal pavimento alla base dello chassis)	117 mm	4 7/8"
Lunghezza totale del sollevapazienti	1.040 mm	41"
Raggio di sterzata	1.320 mm	52"
Classe di protezione del sollevapazienti	IPX4	
Classe di protezione della pulsantiera di controllo	IPX7	
Batteria	24 V, 4 Ah	

Arresto di emergenza e discesa di emergenza

Interruzione automatica della discesa in caso di ostacoli (nella versione elettrica)

Ruote a basso attrito, quelle posteriori con freni

REQUISITI DI SPAZIO

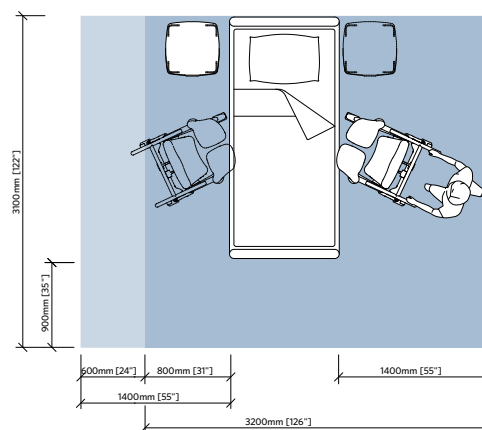

- L'area evidenziata in blu indica lo spazio minimo necessario per consentire all'assistente di utilizzare gli ausili meccanici in modo ergonomico, operando da un lato.
- L'area evidenziata in azzurro indica l'ulteriore spazio necessario per facilitare le attività da entrambi i lati, al fine di assicurare un accesso adeguato al paziente, all'ausilio meccanico e all'assistente.

Novembre 2019. Arjo raccomanda di utilizzare i suoi prodotti solo con componenti originali espressamente progettati per lo scopo e forniti da Arjo. Conformemente alla sua politica di costante miglioramento dei propri prodotti Arjo si riserva di modificarne le specifiche senza preavviso.

® e ™ sono marchi registrati delle aziende del Gruppo Arjo.

Arjo AB · Hans Michelsensgatan 10 · 211 20 Malmö · Sweden · +46 10 335 4500
 Arjo S.p.A · Via Giacomo Peroni 400-402 · 00131 Roma · Italia · +39 0687426211
 Arjo Switzerland AG · Fabrikstrasse 8 · 4614 Hägendorf · Svizzera · +41 (0)61 337 97 77

Arjo.A00174.2.0.IT.IT

arjo